

Agrafeuse linéaire coupante rechargeable Brightness™

Description:

L'agrafeuse linéaire coupante rechargeable pour suture Brightness™ place deux rangées doubles d'agrafes en titane en quinconce tout en coupant et divisant les tissus entre ces deux rangées.

L'agrafeuse linéaire coupante rechargeable pour suture Brightness™ est conçue pour des sutures de 60mm, 80mm et 100mm de long; les unités de recharge existent pour les deux épaisseurs de tissu standard: 3.85 mm et 4.5mm.

L'appareil est rechargeable jusqu'à 4 fois. Il fournit au maximum 5 agrafages par patient. La conception ergonomique avec poignée recouverte de caoutchouc et double manette pour agrafage gauche ou droit améliore le confort et la prise en main de l'utilisateur. La pose des agrafes crée la forme « B » parfaite sur chaque agrafage pour une performance clinique améliorée.


Caractéristiques et avantages comprennent:

- La lame (scalpel) neuve avec chaque cartouche garantit une section précise à chaque agrafage, réduisant ainsi le risque d'infection croisée.
- La charnière arrière permet une utilisation d'une seule main
- Double manette, pour agrafage gauche et droit
- Bouton d'agrafage rapide permettant d'opérer d'une seule main
- Poignée ergonomique recouverte de caoutchouc pour un contrôle accru

Domaine d'utilisation : Chirurgie ouverte

Indications Transsection, résection, anastomose en :

- chirurgie abdominale
- chirurgie gynécologique
- chirurgie thoracique
- chirurgie pédiatrique

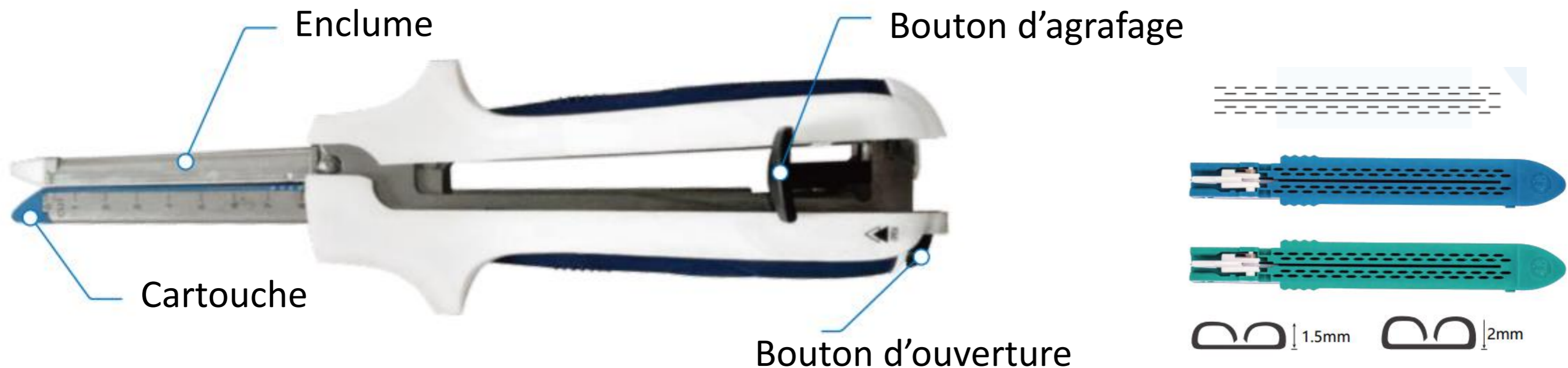

Caractéristique générales

Fabricant	Jiangsu Brightness Medical Devices
Pays d'origine	Chine
EC Rep	Lepu Medical (Europe) Cooperatief U.A
Conformité	Dispositif Médical – Classe IIa Directive européenne 93/42/CEE Certificat de conformité de marquage CE n° HD 601436990001 délivré par TÜV Rheinland, n° d'organisme 0197.
Conservation	Durée de vie du produit (dans l'emballage d'origine) : 3 ans Température: Tenir à l'abri des rayons solaires
Matériaux	Manche Agrafeuse: PPA+35GF Cartouche: Polycarbonate Enclume: Acier Inoxydable (06Cr19Ni10) Agrafes: Titane (Ti-3Al-2.5V – grade 9) Scalpel: Acier Inoxydable (30Cr13)
Procédé de stérilisation	Stérilisation par Oxyde d'éthylène (E.O)
Usage Unique	Oui



Références catalogue

Agrafeuse linéaire coupante rechargeable

Produit	Reference	Couleur	Type de Tissu	Recharge Incluse	Longueur de coupe	Longueur de Suture	Hauteur De L'agrafe Ouverte	Hauteur De L'agrafe Fermée	Conditionnement
Agrafeuse linéaire coupante rechargeable 60mm	QAB603	Bleue	Standard	QB603	60mm	65mm	3.8mm	1.5mm	Sous blister individuel. 10pcs / carton 36*29*28cm/6kgs
Agrafeuse linéaire coupante rechargeable 60mm	QAB604	Verte	Epais	QB604	60mm	65mm	4.8mm	2.0mm	Sous blister individuel. 10pcs / carton 36*29*28cm/6kgs
Agrafeuse linéaire coupante rechargeable 80mm	QAB803	Bleue	Standard	QB803	80mm	85mm	3.8mm	1.5mm	Sous blister individuel. 10pcs / carton 36*29*28cm/6kgs
Agrafeuse linéaire coupante rechargeable 80mm	QAB804	Verte	Epais	QB804	80mm	85mm	4.8mm	2.0mm	Sous blister individuel. 10pcs / carton 36*29*28cm/6kgs
Agrafeuse linéaire coupante rechargeable 100mm	QAB1003	Bleue	Standard	QB1003	100mm	105mm	3.8mm	1.5mm	Sous blister individuel. 10pcs / carton 41*31*33cm/ 7.86kg
Agrafeuse linéaire coupante rechargeable 100mm	QAB1004	Verte	Epais	QB1004	100mm	105mm	4.8mm	2.0mm	Sous blister individuel. 10pcs / carton 41*31*33cm/ 7.86kg

Unité de recharge pour agrafeuse

Produit	Reference	Couleur	Type de Tissu	Hauteur De L'agrafe Ouverte	Hauteur De L'agrafe Fermée	Compatible avec modele	Nombre d'agrafe par recharge	Conditionnement
Cartouche pour Agrafeuse linéaire coupante rechargeable 60mm	QB603	Bleue	Standard	3.8mm	1.5mm	QAB603	64	Emballage individuel 100pcs /carton 58*41*24cm/3.77kgs
Cartouche pour Agrafeuse linéaire coupante rechargeable 60mm	QB604	Verte	Epais	4.8mm	2.0mm	QAB604	64	Emballage individuel 100pcs /carton 58*41*24cm/3.77kgs
Cartouche pour Agrafeuse linéaire coupante rechargeable 60mm	QB803	Bleue	Standard	3.8mm	1.5mm	QAB803	84	Emballage individuel 100pcs /carton 58*41*24cm/3.77kgs
Cartouche pour Agrafeuse linéaire coupante rechargeable 60mm	QB804	Verte	Epais	4.8mm	2.0mm	QAB804	84	Emballage individuel 100pcs /carton 58*41*24cm/3.77kgs
Cartouche pour Agrafeuse linéaire coupante rechargeable 60mm	QB1003	Bleue	Standard	3.8mm	1.5mm	QAB1003	104	Emballage individuel 75pcs /carton 41*31*33cm/4.05kgs
Cartouche pour Agrafeuse linéaire coupante rechargeable 60mm	QB1004	Verte	Epais	4.8mm	2.0mm	QAB1004	104	Emballage individuel 75pcs /carton 41*31*33cm/4.05kgs