


onda
plus

Maximieren Sie die Wirkung der Coolwaves®

Unaufhaltsame Entwicklung bei der Körperperformance

Onda Plus sticht hervor in Ästhetik, Dermatologie und Körperperformance

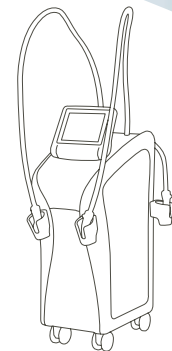

DEKA
Innate Ability

DEKA
Innate Ability

ONDA überzeugt sofort bei:

Lokalisiertem Fett | Cellulite | schlaffer Haut

Schlüsselprinzipien:

DEKA Onda Plus maximiert die Wirksamkeit von Coolwaves® – mit außergewöhnlichen Mikrowellen, die selektiv auf die Fettzellen wirken und ein neues Handstück, welches durch Mikrozirkulation gegen Hauterschlaffung und Cellulite arbeitet. Dies bietet eine komplette Behandlung zur Körperformung und optimiert die Ergebnisse.


Weshalb Sie die Onda Plus wählen sollten:

3 Behandlungen in 1.

Onda Plus wirkt auf lokalisierte Fettansammlungen, Cellulite und Hauterschlaffung in einer einzigen Anwendung

Das **PLUS-Handstück** regt die Mikrozirkulation an, wodurch die Behandlung maximiert und Cellulite beseitigt wird.

Der Patient erlebt eine noch komfortablere Behandlung mit **Onda Plus**, die den klinischen Weg vervollständigt.

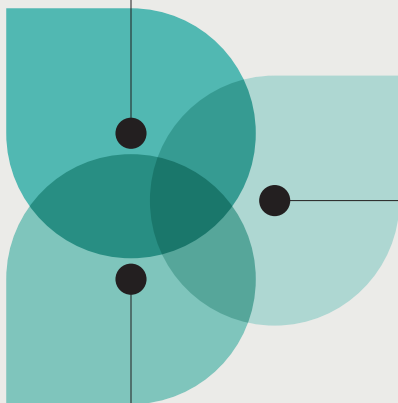

Körper-Skulptur: Coolwaves® sind die letzte Grenze in der Medizinisch-Ästhetischen Industrie

Die **Coolwaves®** bewirken eine regenerierende und straffende, aber nicht invasive Wirkung, die langfristig wirksam und sicher ist. Mit **Coolwaves®** reduziert **Onda Plus** lokale Fettansammlungen am ganzen Körper, insbesondere am Bauch, an den Oberschenkeln, den Hüften und im submentalen Bereich. Es löst das Fett auf, strafft und konturiert die Haut und festigt das Gewebe.

coolwaves®
|||||●●●●|

3 in 1 Effekt, und die Ergebnisse sind sofort sichtbar und lang anhaltend

Lokales Fett

Die Coolwaves® dringen tief ein und zerstören die Zellmembranen der subkutanen Fettzellen, um lokale Fettdepots aufzulösen.



Cellulite

Die Coolwaves® stimulieren das Bindegewebe, das die Fettläppchen der Cellulite umgibt, und verringern so den „Orangenhaut-Effekt“.



Hauterschlaffung

Coolwaves® bewirken die Kontraktion der Kollagenfasern in der Dermis und stimulieren die Produktion von neuem Kollagen, wodurch das Gewebe gestrafft und gefestigt wird.



DIE WISSENSCHAFT DAHINTER




Onda Plus - 3 Handstücke für die Ganzkörperbehandlung

Zusätzlich zum Deep- und Shallow-Handstück – speziell entwickelt für die kontrollierte und fokussierte Abgabe von Energie durch Coolwaves® auf Fett, Hauterschlaffung und Cellulite – Onda Plus verfügt über ein neues Handstück, das für die Drainagemassage entwickelt wurde, um die Wirkung der Collwaves®-Technologie zu maximieren.

Deep
Am besten für lokalisiertes Fett

Shallow
Am besten für Cellulite, Hauterschlaffung
oder submentales Fett

PLUS
Am besten für die Reaktivierung der Mikrozirkulation

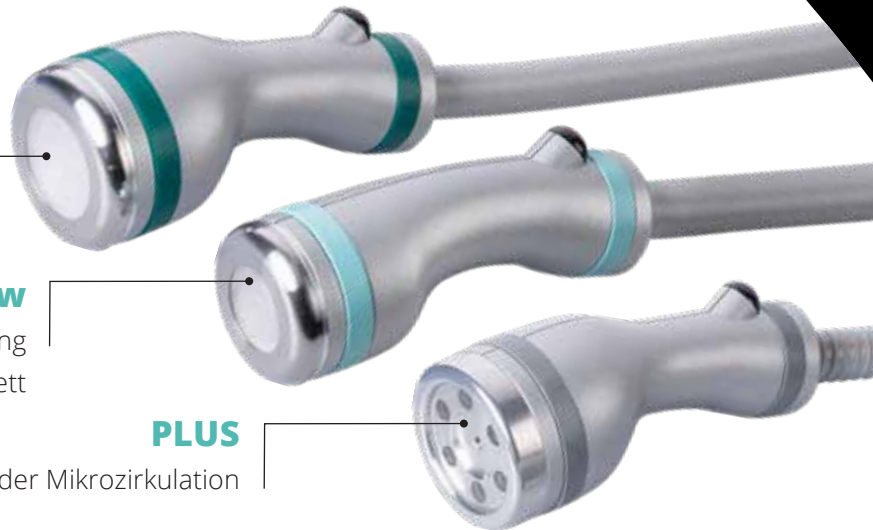

Das neue PLUS-Handstück für eine einfache und effektive Massage und Drainage

Ausgehend von den Erfahrungen mit der Coolwaves®-Technologie wurde das neue PLUS-Handstück entwickelt, um mit ihr zu interagieren. Es gibt einen Luftstrom ab, der wiederum eine Reihe von Wellen erzeugt, die sich auf dem behandelten Areal ausbreiten und die oberflächliche Mikrozirkulation reaktivieren, wodurch der natürliche Rückfluss der Körperflüssigkeiten beschleunigt wird.

Das PLUS-Handstück kann auch Druck auf das kutane, subkutane und adipöse Gewebe ausüben, während die sechs LEDs dem Patienten ein angenehmes Wärmegefühl vermitteln.




DIE WISSENSCHAFT DAHINTER



Sicherheit und Effektivität Keine Schädigung der Hautoberfläche

Die oberflächliche Haut wird geschont, was einen hohen Patientenkomfort gewährleistet. Nebenwirkungen und Entzündungen werden dank dem integrierten **Kontaktkühlungssystem** im Handstück minimiert.

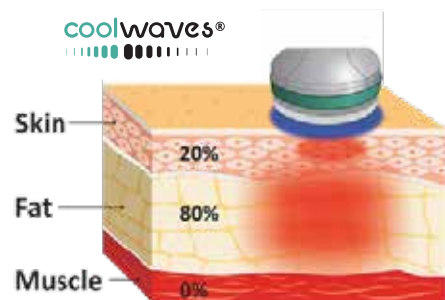



Thermal Viewer: ein zusätzliches Hilfsmittel für die richtige Durchführung der Behandlung (optional)

Mit dem **Thermal Viewer Kit** ist es möglich, die Durchführung der Behandlung auf der behandelten Fläche und die Verteilung der Wärme durch die Wärmebildkamera und das angeschlossene Tablet zu überwachen. Der Patient kann die Durchführung der Behandlung zusammen mit dem Anwender verfolgen und in Echtzeit die Wärmemenge durch verschiedene Farben wahrnehmen, die von den Coolwaves® in die Haut geleitet werden.





Klinische Ergebnisse

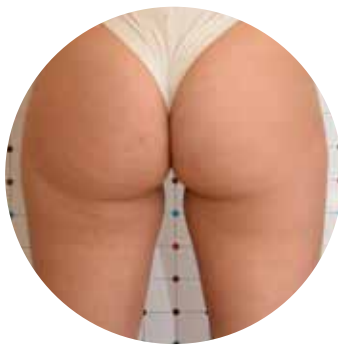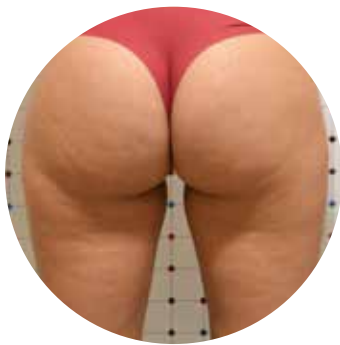

Cellulite und lokalisiertes Fett
Mit freundlicher Genehmigung von
Prof. Paolo Bonan M.D.,
Florenz - Italien



Lokalisiertes Fett und Laxheit
Mit freundlicher Genehmigung von
Giovanni Turra M.D.,
Rudino (BS) - Italien



Lokalisiertes Fett und Laxheit
Mit freundlicher Genehmigung von
Diana Hvas M.D.,
Rødovre - Dänemark



Lokalisiertes Fett (submental)
Mit freundlicher Genehmigung von
Giovanni Turra M.D.,
Rudino (BS) - Italien



Zielgruppe und Markt im Blick

Der **Markt** für Body-Shaping, Hautstraffung und Cellulite-Reduktion ist in den **vergangenen 10 Jahren stetig gewachsen**. Unterstützt wird dies durch das Aufkommen nicht operativer Technologien und sicherer Behandlungen mit dem Schwerpunkt auf spezifischen, therapeutischen Zielen.

Globaler Markt für Body-Shaping und Hautstraffung*



+1,4 Milliarden
2019 ÜBERTROFFEN



12,7%
Wachstum
pro Jahr

* Quelle: Medical Insight, Inc.

Aussagen von Praktikern

Die Nachfrage nach nicht-invasiven Körperbehandlungen steigt rapide an. Um diese Nachfrage zu befriedigen, verwende ich verschiedene Technologien, aber mit Onda Plus kann ich lokalisierte Cellulite-Adipositas und Laxheit auf eine tiefe, direkte und selektive Weise behandeln. Im Gegensatz zu anderen Technologien wirkt Coolwaves viel tiefer und reduziert den behandelten Makel deutlich, wodurch die Elastizität der Haut wiederhergestellt wird.

Die Ergebnisse, die mit Coolwaves erzielt werden können, werden mit dem PLUS-Handstück maximiert, das auf die Mikrozirkulation einwirkt und den Abfluss der Flüssigkeiten ermöglicht, die sich während der Behandlung bewegen. Das PLUS-Handstück hat eine lymphatische Drainagewirkung und beseitigt oberflächliche Flüssigkeitsansammlungen, wodurch die Orangenhaut verschwindet. Die Haut wird also verbessert, angesammelte Toxine werden entfernt, was sich sofort in Tonus und Farbe der Haut niederschlägt.

Die Behandlung mit dem PLUS-Handstück wird von den Patienten sehr geschätzt, da sie ihnen eine angenehme Erfahrung und ein sichtbares Ergebnis bietet."

Dr. **Cristina Cuciti M.D.**, Fachärztin für Dermatologie (Italien)



Neueste wissenschaftliche Veröffentlichungen über Coolwaves®

Effectiveness of microwaves in treatment of cellulite: a preliminary study

Prof. A. Di Pietro u. a.

Microwaves in body sculpting: A prospective study

Prof. P. Bonan u. a.

Remodeling of collagen constituting interlobular septa of subcutaneous adipose tissue following microwaves application

Prof. N. Zerbinati u. a.

DIE PERFEKTE KOMBINATION

Die Stärken von Onda Plus

- Das **erste einzigartige System weltweit**, das selektiv gebundene Mikrowellen für die Körperkonturierung nutzt
- **Keine Ausfallzeiten**
- **Enormer Erfolg** in über **35** Ländern
- 3 Behandlungen in 1: **Fett | Cellulite | Hautstraffung**
- Optimale Ergebnisse mit dem **PLUS Handstück**
- **Absoluter Komfort** für Patienten
- Fokus auf **Sicherheit**



Nur für DEKA-Benutzer:

eine große Unterstützung in der medizinischen Praxis

DEKA Club



Scannen und
ONDA PLUS
in Aktion sehen

Technische Daten

ONDA	
Quelle	Mikrowellen - Coolwaves®
Frequenz	2,45 GHz
Leistung	Bis zu 200 W
Smart Handstücke	Deep - Shallow
PLUS Handstück	Rhythmische Massage
Handstück-Kühlung	Integrierte, patentierte Kühlung
Emissionskontrolle	Fingerschalter
Datenbank	Integriertes Lernprogramm mit Behandlungsprotokollen
Abmessungen und Gewicht	110 (H) cm x 40 (B) cm x 70 (T) cm 60 Kg
Elektrische Anforderungen	100-240 Vac - 50-60 Hz - 1500 VA

Diese Broschüre ist nicht für den US-Markt bestimmt.



Die Produkte von DEKA werden in Deutschland und Österreich exklusiv von Asclepion Laser Technologies vertrieben und sind Teil der Asclepion Family.



www.asclepion.de | Tel. +49 3641 / 77 00 - 100



DEKA M.E.L.A. s.r.l.

Via Baldanzese, 17 - 50041 Calenzano (FI) - Italien
Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884

DEKA Innate Ability

Als Spin-off der El.En. Gruppe, ist DEKA weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Lasern und Lichtquellen für Anwendungen im medizinischen Bereich. DEKA vertreibt seine Geräte in mehr als 80 Ländern über ein ausgedehntes Netz von internationalen Händlern sowie über direkte Niederlassungen in Italien, Frankreich, Japan und den USA. Exzellenz ist das Markenzeichen der Erfahrung und der Anerkennung, die DEKA im Bereich Forschung und Entwicklung in über dreißig Jahren Tätigkeit erworben hat. Qualität, Innovation und technologische Exzellenz verschaffen DEKA und seinen Produkten eine einzigartige und herausragende Position auf dem Weltmarkt. DEKA stellt Lasergeräte in Übereinstimmung mit den Spezifikationen der Richtlinie 93/42/EWG her und sein Qualitätssicherungssystem entspricht den Normen ISO 9001 und ISO 13485.