

Una *nueva* *generación* / con microagujas

con una revolucionaria potenciación
de los productos tópicos

POTENZA™
by CYNOSURE®





El primer sistema del mundo con 4 modos de RF lleva la técnica de microagujas a *un nivel superior*

RÁPIDO

TRATAMIENTO DE CORTA DURACIÓN

PERSONALIZABLE

REAFIRMA LA PIEL*

MEJORA LAS IMPERFECCIONES

REVITALIZA LA PIEL





Para los *tratamientos más personalizados/*

La versatilidad del sistema Potenza permite personalizar los tratamientos según las necesidades específicas de los pacientes, se puede aplicar en *todos los fototipos de piel, en cualquier parte del cuerpo y en cualquier época del año.*

*El 29% de los consumidores opina que la radiofrecuencia con microagujas es el tratamiento más solicitado en este momento***

La *evolución* de las microagujas/



Rodillo con agujas



Lápiz con agujas



Equipos de RF con
microagujas de
primera generación/
convencionales:

- Bipolar
- Matriz de agujas limitada
(aisladas/no aisladas)





Presentamos *Potenza*,
la nueva generación de
microagujas con el motor
más avanzado/

4 modos de RF:


para tratamientos superficiales y
profundos, con resultados visibles de
revitalización y reafirmación de la piel

- Monopolar • Bipolar • 1 o 2 MHz




Motor de velocidad regulable:

el control preciso de la velocidad y del
ángulo de inserción de las agujas, junto
con la frecuencia de emisión, permite
aplicar el tratamiento según la tolerancia
al dolor

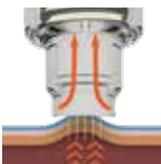

Monitorización de la impedancia:

para tratamientos seguros, delegables y
con resultados reproducibles

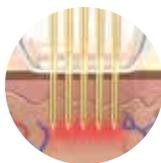

Diseño exclusivo de las agujas:


totalmente personalizable y para todos
los pacientes y fototipos de piel

Potenza ofrece frecuencias de 1 MHz y 2 MHz

En general, la energía de alta frecuencia
se absorbe más rápidamente que la
energía de baja frecuencia.


La frecuencia de 2 MHz es más focalizada,
para un tratamiento específico de los tejidos
y un mayor nivel de respuesta tisular.

Alta frecuencia

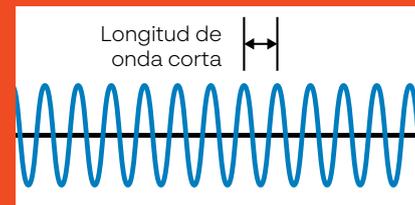

La frecuencia de 1 MHz es más cómoda
y administra la energía de una manera
más extensa y profunda.

Baja frecuencia

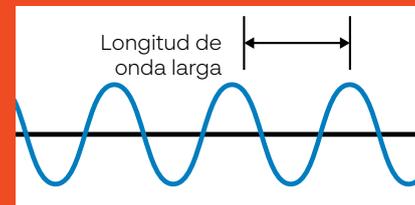

Permite tratar una mayor *variedad* de afecciones de los pacientes /

Tanto superficiales como profundas

El primer sistema del mundo con 4 modos de RF

Monopolar, bipolar y de 1 MHz y 2 MHz. Permite realizar tratamientos superficiales y profundos con un solo equipo

Monitorización de la impedancia

Permite efectuar ajustes instantáneos para lograr y mantener una administración óptima de la RF terapéutica

Pieza de mano de una sola aguja

Trata y mejora las imperfecciones de la piel

Tecnología Tiger Tip™ exclusiva


Permite tratar 2 capas en una sola pasada sin afectar a la zona de la unión dermoepidérmica

Fusion Tip

Un 67% más de penetración



El primer y único cabezal que potencia la penetración de los productos tópicos para *maximizar los resultados* ✓

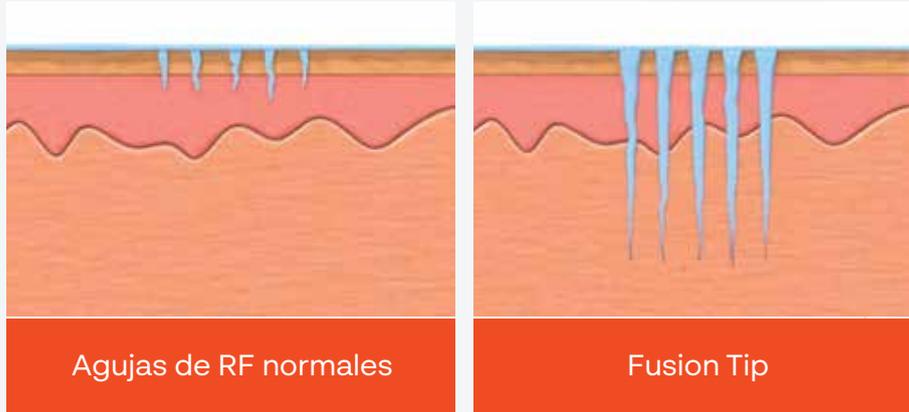


Agujas de RF normales

Fusion Tip

Permite aplicar los productos tópicos de forma segura en la dermis

El exclusivo diseño de doble cámara de aire captura y libera aire hacia la piel con cada pulso.


Potencia un 67% la penetración de los productos tópicos en la piel.

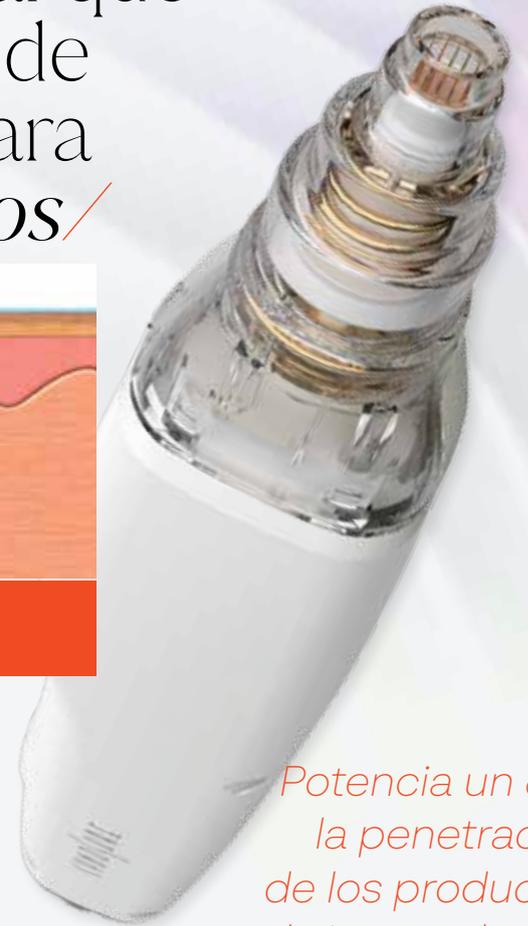



Agujas aisladas

Matriz de 16, 25 y 49 agujas
Profundidad regulable de
0,5 mm a 4,0 mm

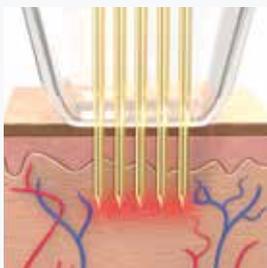


Se utilizan tanto
para tratamientos
localizados como
profundos de la piel.



Agujas individuales aisladas

Profundidades de 0,8 mm,
1,2 mm y 1,5 mm

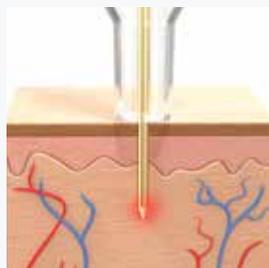


Se emplean para tratar
de forma precisa las
imperfecciones de la
piel y mejorarlas



Tiger Tip *Agujas semiaisladas*

Matriz de 16, 25 y 49 agujas
Profundidad regulable de
0,5 mm a 4,0 mm

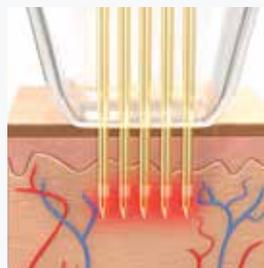


Se utilizan para tratar
más tejido en un único
tratamiento sin afectar
a la epidermis



Fusion Tip

Matriz de 21 agujas aisladas
Profundidad regulable de
0,5 mm a 2,5 mm

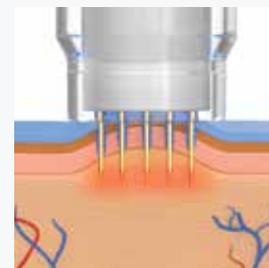

Utiliza un diseño de
doble cámara de aire
que captura y libera aire
hacia la piel para mejorar
la penetración de los
productos tópicos en los
canales

DR. MATTHIAS WAHN

ALEMANIA

DERMATÓLOGO, DERMATOLOGY AND LASER CENTER (HANNOVER)

«Probé el dispositivo en mí mismo y, al cabo de 6 semanas, pensé que el espejo del baño tenía un filtro de Instagram. Creo que Potenza es el equipo más innovador de los últimos 10 años en el sector de la estética».



DRA. JASMIN LAST

ALEMANIA

ESPECIALISTA EN MEDICINA ESTÉTICA, DRA. JASMIN LAST MEDICAL AESTHETICS

«Con Potenza dispongo de una increíble variedad de opciones de tratamiento que ningún otro equipo de RF con microagujas me ofrece. No solo estoy encantada con los resultados que obtienen mis pacientes, sino que he amortizado el equipo en tan solo seis meses. Mis cabezales favoritos son el S-25 para la zona del estómago y el Fusion para la zona del rostro, el cuello y el escote».

DR. KAYWAAN, HANNAH

REINO UNIDO

«Potenza es una tecnología muy superior a las anteriores porque, gracias a su inigualable capacidad de personalizar la intensidad y la distribución de la energía en distintas partes del cuerpo o del rostro, los profesionales disponen de la máxima libertad y flexibilidad posibles».



Ofrece *resultados*. Aumenta *la rentabilidad*/

ROSTRO Cortesía de Murphy Plastic Surgery & Medical Spa



Antes y después de 1 tratamiento

CUELLO Cortesía del Dr. S. Doherty



Antes y después de 1 tratamiento

ABDOMEN Cortesía de Elizabeth Huang, enfermera



Antes y después de 1 tratamiento

CARA Cortesía del Dr. J.H. Yoon



Antes y después de 3 tratamientos Autorización de la FDA para el tratamiento del acné activo.

POTENZA para la reafirmación de la piel

CUELLO *Cortesía de Renee Desrosiers, PA-C, Ageless Body Sculpting*



Antes y 6 semanas después de 2 tratamientos

ZONA SUBMENTONIANA *Cortesía del Dr. S. Doherty*



Antes y después de 1 tratamiento

POTENZA para la revitalización de la piel

MEJORA DE LA TEXTURA DE LA PIEL *Cortesía del Dr. R. Weiss*



Antes y después de 3 tratamientos

CICATRICES DEL ACNÉ *Cortesía del Dr. T. Takahashi*



Antes y después de 1 tratamiento

CICATRICES DEL ACNÉ *Cortesía del Dr. T. Takahashi*



Antes, 45 días después de 1 tratamiento y 46 días después de 2 tratamientos

Para más información,
visite:

www.cynosureuk.com/product/potenza/



* Mediante coagulación de tejidos blandos.

** Estudio con 396 participantes realizado en Alemania.

© 2023. Cynosure, LLC. Todos los derechos reservados. Cynosure es una marca comercial registrada de Cynosure, LLC. Tiger Tip es una marca comercial de Cynosure, LLC. Potenza es una marca comercial de Jeisys Medical, Inc. Cynosure, LLC., es propietaria de todos los derechos fotográficos. Se prohíbe el uso de las imágenes sin el consentimiento por escrito de Cynosure. Los modelos son solo para fines ilustrativos y no son usuarios reales del producto.

El equipo de radiofrecuencia con microagujas de Potenza está destinado a la electrocoagulación y la hemostasia de los tejidos blandos para afecciones dermatológicas. Los posibles efectos secundarios son enrojecimiento temporal, hormigueo temporal y sensación de ardor mientras se recibe el tratamiento. Tal como sucede con cualquier procedimiento médico, el tratamiento no es adecuado para todos los pacientes. Es responsabilidad de un profesional médico cualificado valorar la idoneidad de cada paciente para el tratamiento y comunicar a los pacientes tratados los riesgos derivados del mismo, la atención pretratamiento y postratamiento que recibirán, así como cualquier otra información relevante. Los resultados individuales pueden variar y no están garantizados. PRD_4362

Especificaciones y accesorios

Tipo de RF	Bipolar, monopolar
Potencia	50 W (máx.)
Frecuencia	1 MHz, 2 MHz
Frecuencia de emisión	0,5-3,0 s (intervalos de 0,1 s)
Piezas de mano	100-7043-001: Pieza de mano motorizada 100-7043-002: Pieza de mano AC
Cabezales	Pieza de mano motorizada
Agujas Fusion Tip	100-7043-063: CP-21
Tiger Tip: Agujas semiaisladas	100-7043-051: S-16 100-7043-052: S-25 100-7043-053: S-49
Agujas aisladas	100-7043-054: I-16 100-7043-055: I-25 100-7043-056: I-49
Agujas individuales	Pieza de mano AC 100-7043-060: P1-08 100-7043-061: A1-12 100-7043-062: A1-15
Calibre de la aguja	0,25 mm
Duración del tratamiento	5-500 ms (intervalos de 5 ms)
Alimentación	100-240 V, 50/60 Hz, 500 VA
Dimensiones	50,34 x 36,58 x 36,12 cm (Incl. soporte de cable: 55,02 x 70,10 x 36,60 cm)
Peso	Aprox., 9,5 kg
Carro	47,80 x 48,21 x 96,72 cm, 32,3 kg