Especificaciones del Maximus™

Especificaciones del aplica	dor	
	Aplicadores TriLipo	Aplicador TriFraccional
Potencia de salida máxima de RF	50 vatios	hasta 62m J/Pin
Modo de operación	1MHz	1MHz
Tamaño del punto	N/A	10,5 x 10,5 mm
Cabezales descartables	No/A	Cabezal 7 x 7 estándar
Control de potencia de salida de RF	Modulación por amplitud de pulsos (PWM)	cabezal 7x7 (49 pins)
Potencia máxima de salida por pulso	N/A	25 joules
Duración de pulso de TriLipo DMA	20 a 400 μs	N/A
Frecuencia del pulso de TriLipo DMA	0,78; 1,56; 3,12; 6,25; 12,5 (Hz)	N/A
Amplitud del pulso de TriLipo DMA	0 a 300 mA	N/A
Programas	RF;TLP0;PULSE	Baja, media, alta
Especificaciones de sistema		
Voltage de entrada	100 a 240 voltios, 50 a 60 Hz, 2,2 amperios máx.	
Peso	~22 kg	
Dimensiones	57 x 49 x 127 cm (Largo. x anch. x alt.)	

Acerca de Pollogen®

Pollogen Ltd. es el líder mundial en el mercado de la medicina estética, proporcionando soluciones novedosas, seguras y eficaces a mujeres y hombres que mejoran y amplían la práctica de los profesionales de estética médica. La compañía ofrece productos para una variedad de tratamientos cutáneos con las tres marcas más prestigiosas del sector: TriPoltar®, TriLipo® y TriFractional™

Pollogen ofrece una línea completa de plataformas no invasivas de tratamiento antienvejecimiento para el remoldeo facial y corporal, con probada eficacia en ensayos clínicos, para reducir circunferencias, celulitis y reafirmar la piel. Los equipos médicos estéticos emblemáticos Maximus, Apollo y Regen XL ofrecen a los clientes tratamientos de belleza express contra el envejecimiento, de probada eficacia en ensayos clínicos, seguros y eficaces y que brindan resultados inmediatos y duraderos. Pollogen, con una red de distribución en más de 60 países, provee a profesionales médicos de todo el mundo soluciones novedosas, que mejoran el rendimiento de las inversiones.

Para obtener más información, visite www.pollogen.com.el





TriLipo® MED - 4 Capas, 3 Tecnologías y 1 procedimiento exclusivo

- Contorneado facial
- Duradera reducción de las circunferencias
- Reducción de arrugas
- Mejor aspecto de las cicatrices del acné
- Piel más firme y rejuvenecida
- Tonificación cutánea
- Reducción de la celulitis
- Mejora de las estrías
- Desintoxicación e incremento en el drenaje
- Mejora circulación y oxigenación sanguínea
- Estiramiento, tonificación y reforzamiento de los músculos

El procedimiento TriLipo MED es el tratamientono quirúrgico más efectivo para el contorno facial y corporal. A diferencia de cualquier otra solución existente en el mercado, TriLipo MED utiliza tres avanzadas tecnologías: TriLipo RF + TriLipo DMA + TriFraccional. Su combinación posibilita tratar las tres capas de la piel - epiedermis, dérmis y grasa junto con el músculo. Todas las tres tecnologías estan incluidas en un sólo equipo, el sistema Maximus. Maximus tiene 3 aplicadors TriLipo para tratar grandes, medias y pequeñas áreas y el aplicador TriFraccional para el resurfacing fraccional de la piel.

Resultados visibles inmediatamente, Eficacia prolongada, Resultados clínicamente comprobados, Procedimientos ambulatorios rápidos, Mínimo período de recuperación, Tratamientos no invasivos


TriLipo® RF + TriLipo® DMA + TriFractional™ = TriLipo® MED

"El sistema Maximus, que fortalece el tejido facial de manera segura y eficaz y suaviza el cutis, brinda resultados inmediatos y duraderos contra el envejecimiento."

Dr. Ghislaine Beilin, París, Francia

Epidermis Dermis

Músculo

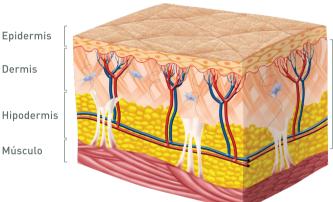





Fotos Antes y Después

Resurfacing Trafraccional





Gentileza del Dr. Alex Levenberg, Tel Aviv, Israel

TriLipo MED anti edad





Gentileza de la Dra. Cruzy Salazar, Tel Aviv, Israel

Reducción de la circunferencia






Gentileza de la Dra. Cruzy Salazar, Tel Aviv, Israel


EXPECT SOLUTIONS

Tecnología TriLipo® - dos tecnologías en un solo aplicador


La única tecnología TriLipo combina dos efectivas tecnologías - TriLipo Radiofrecuencia (RF) y TriLipo Activación Muscular Dinámica (DMA). Usándolas de manera simultánea en un solo aplicador, crean un efecto sinérgico no invasivo de eliminación de la grasa y de drenaje linfático, así como de estiramiento de la piel.

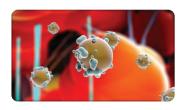

La tecnología TriLipo funciona simultáneamente en la dermis, hipodermis (grasa) y las capas musculares para obtener una mayor reducción de las grasas. El efecto combinado de TriLipo RF y TriLipo DMA provoca el calentamiento profundo y homogéneo de las capas dérmicas y de grasa. La energía de radiofrecuencia de TriLipo calienta la capa de tejido adiposo subcutáneo forzando la liberación de grasa líquida de las células. Este efecto térmico acelera el metabolismo lipídico natural.

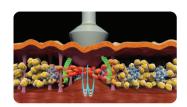

La eliminación de la grasa se acelera al aplicarse una presión interna y externa simultánea sobre la capa de grasa. Internamente, la tecnología de activación muscular dinámica (DMA) del TriLipo hace que el músculo se contraiga y empuje las células adiposas hacia arriba. En el plano externo, la presión del aplicador empuja las células adiposas hacia abajo. Este efecto de "compresión" resultante causa el drenaje de las grasas a través del mecanismo de drenaje linfático patentado de la DMA. El efecto combinado del TriLipo RF y DMA acelera la circulación sanguínea y optimiza la oxigenación y la desintoxicación de los tejidos.

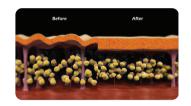


La energía focalizada de radiofrecuencia TriLipo provoca la contracción de las fibras de colágeno produciendo de manera inmediata un efecto tensor. Simultáneamente, la aceleración del metabolismo del fibroblasto regenera el colágeno, cuyo resultado es el estiramiento de la piel a largo plazo.


Tecnología TriFractional™ - tres pulsos para una penetración más profunda

TriFraccional, una avanzada tecnología antienvejecimiento por radiofrecuencia, posibilita un rejuvenecimiento cutáneo fraccionario (resurfacing) efectivo y profundo, uno de los procedimientos más demandos en la actualidad. La energía TriFraccional crea micro-lesiones que activan el mecanismo natural de respuesta curativa, que a su vez induce la neocolagénesis y crea un tejido cutáneo sano. Tras el tratamiento, las áreas no tratadas funcionan como centros de curación. TriFraccional viene acompañada de cabezales descartables, para asegurar la comodidad y seguridad del paciente.


La energía TriFraccional se emite en tres pulsos, que posibilitan una penetración más profunda de la energía de radiofrecuencia en el tejido, de manera más confortable, sin sobrecalentar el tejido objetivo y al mismo tiempo, reduciendo el efecto sobre la epidermis. El primer pulso es un pulso micro-ablativo, que extirpa pequeños puntos en la epidermis, el segundo penetra en la piel calentando los tejidos y el tercero penetra de manera más profunda calentando la dermis media. La tecnología fraccional de tres pulsos TriFraccional brinda un tratamiento seguro y eficaz, con un mínimo de molestias y de periodos de recuperamiento.

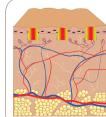

Primer pulso Pulso ablativo, seguido de enfriamiento TRT (Tiempo de Relajación Térmica)

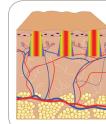

Primer pulso Pulso ablativo. eguido de enfriamiento TRT (Tiempo de Relajación Térmica)

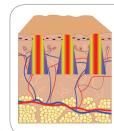

Tercer pulso Pulso de calentamiento profundo