

babybrezza®
one step™ sterilizer dryer
advanced



Gebrauchsanweisung

HINWEIS: Reinigen und entkalken Sie den Sterilisator unbedingt einmal pro Woche oder nach Bedarf. Alle Flaschen, Pumpenteile & Zubehörteile müssen leer, sauber und gespült sein, bevor sie in den Sterilisator gegeben werden.

Hinweise zur sicheren Anwendung


Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden.

1. Lesen Sie diese Anleitung genau durch, bevor Sie das Gerät benutzen.
2. Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Gerät angegebene Netzspannung mit der Netzspannung in Ihrem Haus übereinstimmt.
3. Ziehen Sie bei sichtbaren Schäden am Gerät, am Stecker oder am Netzkabel sofort den Stecker aus der Steckdose und verwenden Sie das Gerät nicht mehr.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
5. Erlauben Sie Kindern nicht, das Gerät zu berühren oder zu benutzen. Das Gerät wird sehr heiß und der Dampf kann schwere Verbrühungen verursachen.
6. Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es in Betrieb ist oder sich heiße Flüssigkeiten darin befinden.
7. Heiße Oberflächen nicht berühren.
8. Gerät nicht auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen, in einem beheizten Ofen oder in der Nähe eines Gas- oder Elektroheizgeräts aufstellen.
9. Vor Reinigung oder Lagerung Gerät vom Netz trennen.
10. Netzkabel, Stecker und Sockel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
11. Der Sockel des Sterilisators enthält keine Teile, die Sie reparieren oder austauschen können. Nicht zerlegen.
12. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Nicht im Freien verwenden.
13. Dieses Gerät eignet sich weder für Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten noch für Personen ohne Erfahrung oder Kenntnisse, sofern diese nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.
14. a) Das mitgelieferte Netzkabel ist bewusst kurz, um die Gefahr zu verringern, dass sich jemand darin verheddern oder darüber stolpern kann.
b) Verlängerungskabel sind erhältlich. Bei der Verwendung die genannten Vorsichtsmaßnahmen walten lassen.
c) Wenn ein Verlängerungskabel verwendet wird: Die angegebene Nennleistung des Verlängerungskabels sollte mindestens so groß sein wie die Nennleistung des Geräts. Das Kabel sollte nicht herabhängen, damit kein Risiko besteht, dass versehentlich daran gezogen wird.
15. Wenn sich Kinder in der Nähe befinden, müssen sie beaufsichtigt werden.
16. Nicht als Raumheizung verwenden.
17. Stets auf einer ebenen, hitzebeständigen Oberfläche verwenden.
18. Gerät und Stecker stets außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern halten.
19. Gerät erst ausschalten, bevor Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
20. Achten Sie darauf, Wasser in den Sockel einzufüllen, bevor Sie den Sterilisierungszyklus starten.
21. Vor dem Gebrauch grundsätzlich 165 ml destilliertes Wasser einfüllen. Wenn Sie zu wenig oder zu viel Wasser in den Sterilisator geben, wird die Sterilisierungsleistung möglicherweise nicht erreicht.
22. Immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Gerät abkühlen lassen, bevor Teile entnommen oder eingelegt werden.
23. Geräte mit beschädigtem Kabel oder Stecker nicht verwenden. Verwenden Sie das Gerät auch dann nicht, wenn es nicht korrekt funktioniert oder beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung zur nächsten autorisierten Kundendienststelle.
24. Die Verwendung von Aufsätzen wird vom Hersteller des Geräts nicht empfohlen, da dies zu Verletzungen führen kann.
25. Nur für den Hausgebrauch. Nicht im Freien verwenden.
26. Gerät während des Betriebs nicht öffnen, da es kochendes Wasser enthält. Schützen Sie sich vor austretendem Dampf an den Entlüftungsoffnungen im Deckel.
27. Zwischen den einzelnen Anwendungen mindestens 30 Minuten verstreichen lassen. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie die Starttaste erneut drücken.
28. Aus dem Gerät austretender Dampf kann Verbrennungen verursachen. Lassen Sie das Gerät nach Beendigung des Zyklus immer 5 Minuten abkühlen, bevor Sie den Deckel abnehmen.
29. Schließen Sie das Gerät nur an ordnungsgemäß geerdete Steckdosen an, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
30. ACHTUNG! Vor Wartungsarbeiten Stromzufuhr unterbrechen. Stromschlaggefahr!
31. Verwenden Sie zum Sterilisieren nur destilliertes Wasser, abgefülltes Wasser oder Leitungswasser.
32. Keine Zusatzstoffe verwenden.
33. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tisch- oder Arbeitsplattenkante hängen und halten Sie es von heißen Oberflächen fern.
34. Alle über die Reinigung des Geräts hinaus gehenden Wartungsarbeiten sollten von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
35. Achtung: Nach der Benutzung ist die Heizplatte noch heiß.
36. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen bzw. unerfahrenen Benutzern verwendet werden, wenn diese beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind.
37. Achten Sie darauf, dass der Stecker nicht bespritzt wird.
38. Das Gerät kann bei unsachgemäßem Gebrauch Verletzungen verursachen, etwa wenn ungeeignete Flüssigkeiten verwendet werden.
39. Dieses Gerät ist nicht für das Aufwärmen und Garen von Lebensmitteln oder Säuglingsnahrung bestimmt.




Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass entsprechende Produkte in der gesamten EU nicht mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden dürfen. Achten Sie zum Schutz von Umwelt und Gesundheit auf korrekte Entsorgung - am besten durch Recycling, denn damit schonen Sie die Ressourcen des Planeten. Geben Sie Ihr Gerät in die Elektroschrottsammlung oder wenden Sie sich an den Einzelhandel, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dort wird das Gerät umweltfreundlich wiederverwertet.


Sterilizer Dryer Advanced - Teile

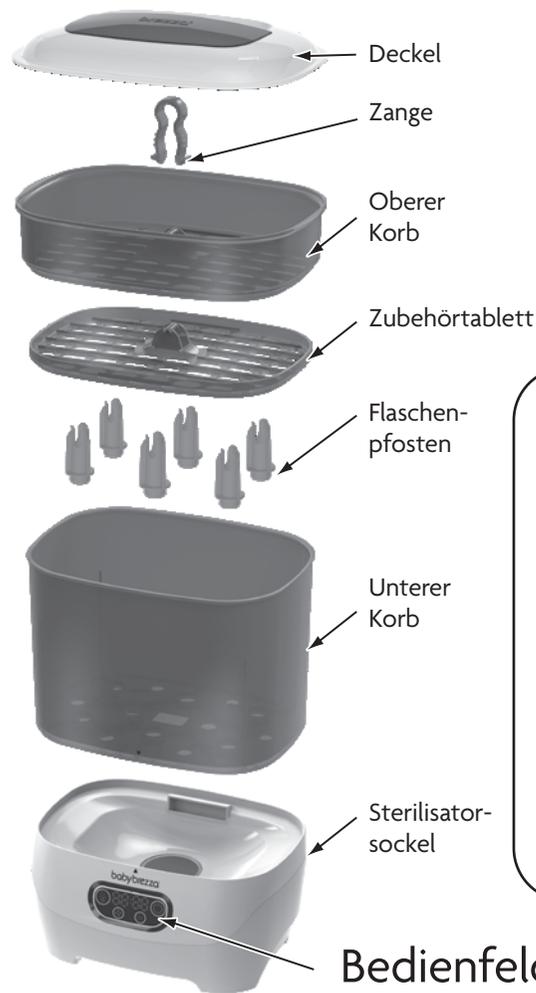

Filter-Komponenten

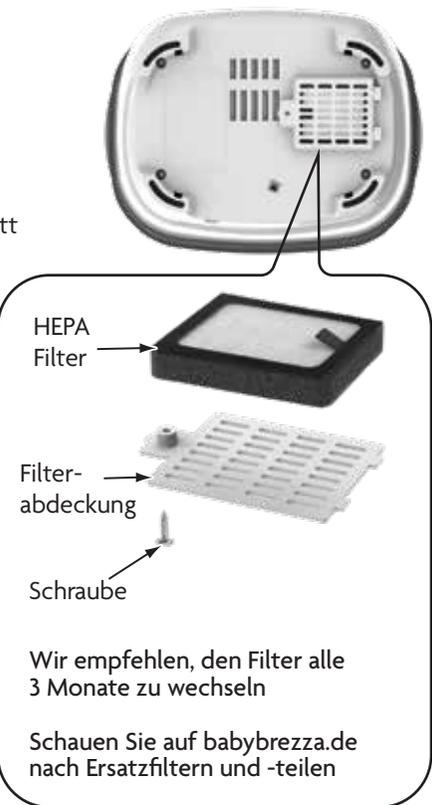

Bedienfeld

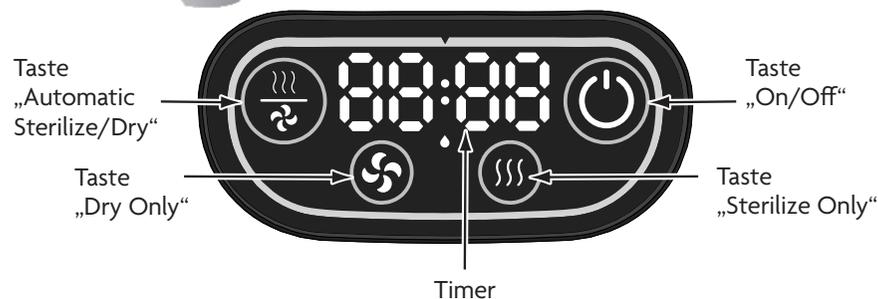

TECHNISCHE DATEN	MODELL: BRZ0069S/BRZ0069SEU
VERSORGUNGSSPANNUNG: 220-240V ~ 50-60Hz	LEISTUNG: 700W

Einrichtung und Benutzung

Alle Flaschen, Pumpenteile & Zubehörteile müssen LEER, SAUBER UND

GESPÜLT sein, bevor sie in den Sterilisator gegeben werden.

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche, wo es für Kinder unerreichbar ist und während des Betriebs nicht umgestoßen oder bewegt werden kann.
2. Nehmen Sie den Deckel, die Körbe und das Zubehörgestell vom Sockel des Sterilisators ab.
3. Gießen Sie Wasser bis zur MAX-Linie (165 ml) auf die Heizfläche. Niemals über die MAX-Linie hinaus füllen. Verwenden Sie am besten destilliertes Wasser, damit sich keine Ablagerungen auf der Heizplatte bilden. Sie können jedoch auch Flaschen- oder Leitungswasser verwenden, müssen dann aber möglicherweise häufiger entkalken.
4. Setzen Sie den unteren Korb auf den Sockel.
5. Legen Sie saubere Flaschen mit der Öffnung nach unten auf die Flaschenpfosten
6. Legen Sie das Zubehörtablett in den unteren Korb (das Tablett ist nicht für die Verwendung mit hohen Flaschen geeignet).
7. Legen Sie das Flaschenzubehör auf das Zubehörgestell (Sauger, Schraubringe, Deckel usw.)
8. Legen Sie den oberen Korb auf den unteren Korb und achten Sie darauf, dass er lückenlos und sicher sitzt.
9. Legen Sie die Milchpumpenteile und sonstiges Zubehör in den oberen Korb.
10. Drücken Sie die Taste „On/Off“  einmal. Die Funktionssymbole leuchten auf. Wählen Sie die gewünschte Funktion entsprechend den folgenden Hinweisen. Wenn nach dem Drücken der Taste „On/Off“ keine Funktion ausgewählt wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Automatische Sterilisieren/Trocknen-Funktion:

1. Wählen Sie die Trocknungszeit (nach der Dampfsterilisierung): Drücken Sie die Taste „Sterilize/Dry“  einmal für 30 Minuten Trockenzeit, zweimal für 45 Minuten Trockenzeit, dreimal für 60 Minuten Trockenzeit. Der Sterilisierungs-/Trocknungszyklus beginnt 3 Sekunden nach dem letzten Tastendruck.
2. Wenn der Sterilisierungszyklus beginnt, zählt der Timer bis zum Ende des Zyklus sekundenweise hoch.
3. Wenn die Sterilisierung abgeschlossen ist, ertönt ein Signalton, das Gerät pausiert 3 Sekunden und beginnt dann mit dem Trocknungszyklus für die in Schritt 1 gewählte Zeitspanne. Der Timer des Zeitmessers zählt Sekunde für Sekunde herunter, bis er 00:00 erreicht.
4. Nach Beendigung des Trocknungszyklus gibt das Gerät 5 Signaltöne ab und schaltet sich automatisch aus.

Nur sterilisieren:

1. Drücken Sie die Taste „Sterilize“  einmal. Der Timer zeigt „00:00“ und das Dampfsymbol an. Der Sterilisierungszyklus beginnt 3 Sekunden nach dem Drücken der Taste „Sterilize“ und der Timer zählt bis zum Ende des Zyklus sekundenweise hoch.
2. Nach Beendigung des Sterilisierungszyklus gibt das Gerät 5 Signaltöne ab und schaltet sich automatisch aus.

Nur trocknen:

1. Drücken Sie die Taste „Dry“  einmal für 30 Minuten Trockenzeit, zweimal für 45 Minuten Trockenzeit, dreimal für 60 Minuten Trockenzeit. Der Trocknungszyklus beginnt 3 Sekunden nach dem letzten Tastendruck, und der Timer zählt sekundenweise bis zum Erreichen von 00:00 herunter.
2. Nach Beendigung des Trocknungszyklus gibt das Gerät 5 Signaltöne ab und schaltet sich automatisch aus.


Entkalken:

Bitte entkalken Sie die Heizplatte des Sterilisators einmal pro Woche, um Überhitzung, Fehlfunktionen oder Produktausfälle zu vermeiden. Vor allem in Gebieten mit hartem Wasser können sich nach dem Sterilisierungszyklus mineralische Rückstände auf der Heizplatte ablagern. Um Kalkablagerungen zu vermeiden, wischen Sie die Oberflächen nach jedem Gebrauch mit einem weichen, feuchten Tuch ab. - Mineralische Ablagerungen können mit einer Entkalkungslösung oder durch Einwirkenlassen von 60 ml weißem Essig auf die Heizplatte (ca. 30 Minuten) entfernt werden. Die Platte sollte dann abgespült und mit einem sauberen, trockenen Tuch abgewischt werden. Nach der Reinigung können Verfärbungen zurückbleiben, die jedoch keinen Einfluss auf die Leistung haben. - Bei Bedarf kann auch häufiger entkalkt werden.

Reinigung:


- Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker des Geräts.
- Tauchen Sie Sockel und Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Reinigen Sie den Sockel nicht unter dem Wasserhahn.
- Reinigen Sie den Sockel und das Bedienfeld mit einem weichen, feuchten Tuch.
- Verwenden Sie keine Scheuerschwämme zum Reinigen von Kunststoffteilen des Geräts.
- Deckel und Zubehörgestell können in heißem Seifenwasser gereinigt werden.

Achtung! Wenn Wasser aus dem Sockel entfernt werden muss, immer VON DER GEBLÄSEÖFFNUNG WEG gießen. Beachten Sie das Symbol für die Gießrichtung auf dem Sockel und gießen Sie das Wasser in Pfeilrichtung.

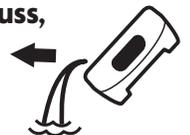


Aufbauvarianten


Oberer und unterer Korb mit Zubehörtablett Zur Verwendung mit kurzen Flaschen, Zubehör und Pumpenteilen.

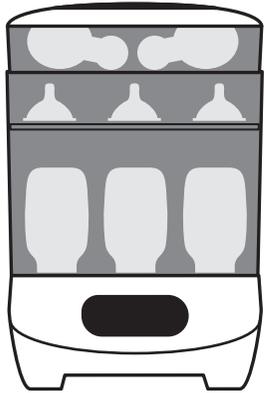

Oberer und unterer Korb OHNE Zubehörtablett Zur Verwendung mit hohen Flaschen und Zubehör.

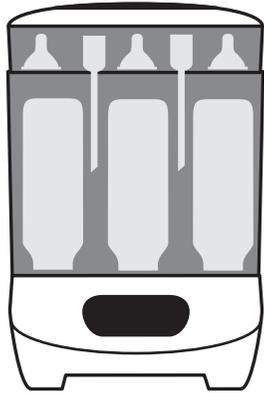

Unterer Korb nur mit Zubehörtablett Zur Verwendung mit kurzen Flaschen, Zubehör und Pumpenteilen.

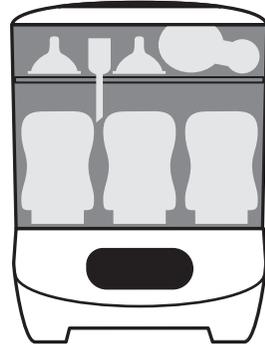

Oberer Korb nur OHNE Zubehörtablett Für die Verwendung mit Zubehör, Schnullern und kleinen Gegenstände.




Milchpumpenteile und andere dampfsterilisierbare Gegenstände stellen Sie in den unteren oder oberen Korb. Probieren Sie verschiedene Anordnungen aus und finden Sie heraus, welche Aufteilung für Sie am besten ist.

TIPP: Um eine optimale Trocknungsleistung zu erzielen, darf der Sterilisator nicht überladen werden.

Verwenden Sie die mitgelieferte Zange:

Die Zange kann in den oberen Korb oder in die Zubehörschale eingesetzt und aufbewahrt werden. Wenn die Zange eingerastet ist, kann sie zum Anheben des Korbs oder Tablett verwendet werden. Drücken Sie die Zange leicht zusammen, um sie zu herauszunehmen. Sie kann auch zum Greifen von Teilen und Saugern im Sterilisator verwendet werden.

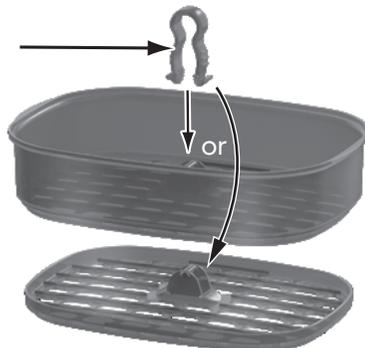

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Gerät lässt sich nicht starten	Gerät ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen.	Sorgen Sie dafür, dass der Netzstecker fest in der Steckdose steckt.
	Gerät ist nicht eingeschaltet	Drücken Sie die Taste „On/OFF“, bevor Sie eine Funktion wählen
	Über der Heizplatte befindet sich nicht genügend Wasser	165 ml Wasser einfüllen
Heizplatte ist verkalkt	Dauerhafte Verwendung von mineralreichem (hartem) Wasser	Heizplatte nach jedem Gebrauch reinigen und destilliertes Wasser verwenden
Artikel sind nach dem Trocknungszyklus nicht trocken.	Wasser sammelt sich an vertieften oder eingedrückten Bereichen der in den Sterilisator eingelegten Gegenstände.	Achten Sie darauf, dass die Teile so platziert werden, dass sich kein Wasser sammeln kann.
	Der gewählte Trocknungszyklus ist nicht lang genug, um die Gegenstände im Sterilisator ausreichend zu trocknen.	Wählen Sie eine längere Trocknungszeit.

Wenn Sie das Problem nicht mit Hilfe der obigen Tabelle beheben können, besuchen Sie babybrezza.de, um den für Sie zuständigen Kundendienst zu finden.