

hegen

Hegen PCTO™ Feeding Bottle PPSU

Hegen PCTO™ Breast Milk Storage PPSU

Instructions for Use



**BPA
BPS
FREE**



Phthalate-Free
and PVC-Free

Extra Slow	Slow Flow	Med Flow	Fast Flow	Thick Feed
				
0m+	1m+	3m+	6m+	6m+

Please make sure you use a teat with the correct flow rate when you feed your baby. Inspect all items before each use. Pull the feeding teat in all directions. Throw away at the first sign of damage or weakness. The bottle and accompanying parts may blur after repeat use, wash, warming and sterilization. **For safety and hygiene reasons, we recommend replacing Teats every 3 months and Collar/Lid/Transparent Cover/Container every 6 months.**

*Only use Hegen teats with Hegen Feeding bottles.

For more information on our products, please visit www.hegen.com.

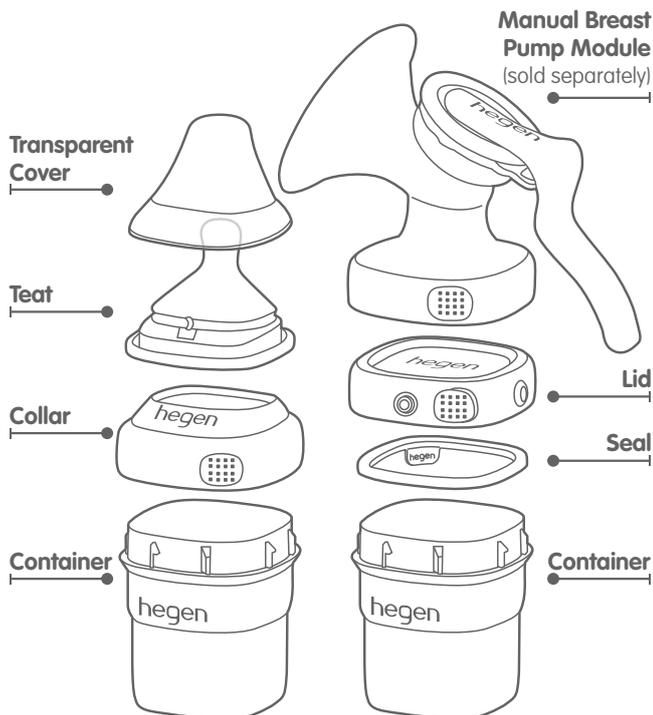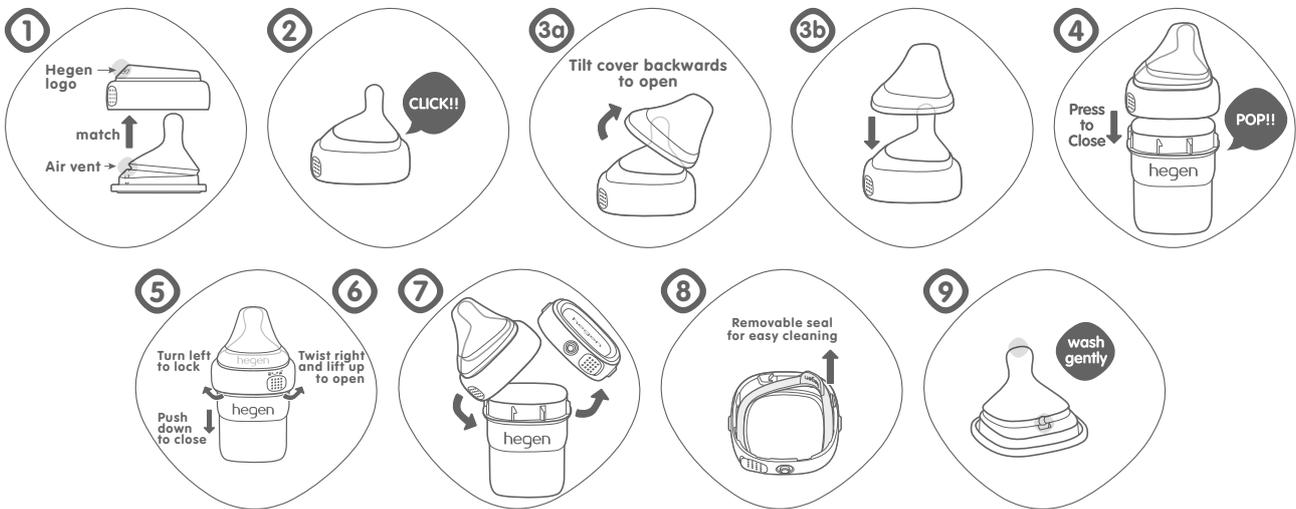

Part	Material	Heat Resistance
Transparent Cover / Collar / Lid / Adapter	Polypropylene (PP)	-20°C to 110°C
Teat / Seal	Silicone	
Container	Polyphenylsulfone (PPSU)	-20°C to 180°C

استخدم دوماً هذا المنتج تحت إشراف الكبار • تجنب استخدام حلمات الرضاعة بمثابة مهدئ • يمكن أن يتسبب المص المستمر والمطول للسوائل في تسوس الأسنان • تأكد دائماً من درجة حرارة الغذاء قبل الرضاعة • احتفظ بجميع المكونات غير المستخدمة بعيداً عن متناول الأطفال • قم بتنظيف المنتج قبل أول استخدام • افحص المكونات قبل كل استخدام واسحب حلمة الرضاعة في كل الاتجاهات. تخلص من المنتج عند ظهور البوادر الأولى للتلوث أو الضعف • تجنب ترك حلمة الرضاعة عرضة لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة أو تركها في مطهر ("محلول تعقيم") لفترة أطول من الموصى بها لأن هذا قد يضعف الحلمة • ضعه في ماء مغلي لمدة ٥ دقائق قبل أول استخدام. وهذا لضمان النظافة • نظفه قبل كل استخدام • اغسله في غسالة صحون (الرف العلوي فقط) – قد تتسبب ألوان الأغذية أو بقايا الحليب أو الزيت والتي تتحمل العمليات الحرارية في تبقيع الأجزاء بصفة دائمة • تجنب تسخين المحتويات داخل فرن ميكروويف حيث إن ذلك يمكن أن يؤدي إلى التسخين غير المتسق ويمكن أن يؤدي إلى حرق الطفل • لا تستخدم المنتج في فرن أو ميكروويف مسخن. قم دوماً بتقليب الطعام الساخن لضمان توزيع الحرارة واختبر درجة الحرارة قبل تقديمه • هذه ليست لعبة • لا تسمح للطفل بالعبث بالأجزاء الصغيرة أو المشي/الجري عند استخدام الزجاجات أو الأكواب • لا تقم أبداً بتوصيل الأسلاك، الشرائط، الأربطة أو الأجزاء الفضفاضة من الملابس. قد يتسبب ذلك في إختناق الطفل. لا تستخدم مواد أو مذيبيات التنظيف الكاشطة. فقد يتسبب ذلك في حدوث تلف • تجنب وضع المكونات مباشرة على الأسطح التي تم تنظيفها بمنظفات مضادة للبكتريا • قد تتأثر المواد البلاستيكية بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتعقيم. فهذا قد يؤثر على تركيب المنتج وشكله الجمالي • يعد التجميع الصحيح ضرورياً لضمان منع التسرب • يمكن تخزين لبن الأم المأخوذ من ثدي الأم في زجاجات رضاعة Hegen نظيفة ومعقمة/تخزين لبن الأم في الثلاجة لمدة تصل إلى ٤٨ ساعة (ليس في الباب) وفي المجمد لمدة ٣-٦ أشهر • تجنب إعادة تجميد لبن الأم أو إضافة لبن أم طازج إلى لبن مبرد/مجمد بالفعل.

التنظيف:

قم دوماً بغسيل يديك بالصابون قبل تنظيف المنتج أو تعقيمه أو قبل إرضاع الطفل • قبل الاستخدام للمرة الأولى، قم بتفكيك كل مكونات المنتج وغسلها باستخدام منظف للزجاجات واشطفها في مياه نظيفة بشكل شامل قبل تعقيمها. يساعد ذلك على الحفاظ على النظافة الشخصية. قم دائماً بفصل المكونات عن بعضها البعض واغسل المنتج باستخدام منظف للزجاجات على الفور بعد كل استخدام • عند استخدام غسالة الصحون (الرف العلوي فقط)، تجنب استخدام إعداد درجة الحرارة العالية مثل "التنظيف الصحي" أو "تعزيز الحرارة"، وهي إعدادات يمكن أن تؤدي إلى تشويه المكونات • تجنب استخدام مواد أو مذيبيات التنظيف الكاشطة أو العنيفة كيميائياً أو المنظفات المضادة للبكتريا حيث إنها يمكن أن تؤدي إلى إتلاف المنتج • قم بفرك فتحة التهوية المضادة للمغص وفتحة الحلمة لتنظيفها بالأصابع في المياه الدافئة (انظر الصورة ٩). حيث إن الحلمة تتسم بالرقّة الشديدة، يمكن أن يسبب التعامل العنيف إلى انقسام فتحة التهوية المضادة للمغص، مما يمكن أن يؤدي إلى حدوث تسربات • لا تستخدم فرشاة للحلمة أو أي معدات أخرى لتنظيف فتحة التهوية المضادة للمغص في الحلمة حيث إن ذلك يمكن أن يسبب تلفاً • يمكن أن يؤدي تنظيف المنتج باستخدام فرشاة الزجاجات السلكية إلى حدوث خدوش • تذكر تنظيف كل الجوانب وكذلك قاعدة الزجاجات وأغطيها • لا تقلب الحلمة بحيث يصبح داخلها مكشوفاً للخارج لتنظيفها. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث تلف بها.

التعقيم:

المنتج ملائم للتعقيم بالبخار (الكهربائي)، أو في الماء المغلي أو في محلول أقراص/سائل بالماء المغلي أو البارد. إذا اخترت التعقيم من خلال معقم البخار الكهربائي، يجب أن يتم الالتزام بتعليمات التعقيم لأجهزة التعقيم بعناية شديدة. عند الغلي: اجعل المياه تغلي، واغس المكونات في المياه التي تغلي بما لا يتجاوز ٣ دقائق. بالنسبة للتعقيم، يجب أن يتم فصل كل المكونات عن بعضها البعض بشكل كامل لتجنب ردود الأفعال المختلفة للمواد بما يمكن أن يؤدي إلى حدوث تشوهات. يجب أن تتم إزالة كل بقايا الشحوم أو الزيوت بشكل شامل قبل التعقيم لتجنب التلطيخ الدائم للمنتج. يمكن أن يسبب التعقيم الكيميائي واستخدام كريمة اليد و / أو كريمات الشمس تلاشي النصوص المطبوعة.

التجميع:

يلزم التجميع بشكل صحيح للتحقق من عدم حدوث أي تسرب. اضغط على فتحة التهوية المضادة للمغص برفق للتحقق من فتحها. (1) طابق وضع فتحة التهوية المضادة للمغص مع الوجه العلوي للطوق مع شعار Hegen. (2) اسحب اسحب الحلمة من خلال الطوق إلى أن يتم تركيبها بشكل محكم. ملاحظة: إذا كان بإمكانك سحب الحلمة كاملة للخارج عبر الطوق، فهذا يعني أن التجميع تم بشكل غير صحيح. (3) ضع الغطاء على الطوق والحلمة بعد تجميعهما. (3ب) قم بإمالة الغطاء الشفاف للخلف لفتحه (لا تسحبه لأعلى). (4) امسك الغطاء والحلمة والطوق بعد تجميعها واضغط عليها لإحكام غلقها على الزجاجة. (5) لإحكام الربط، أدر في نفس اتجاه حركة عقارب الساعة. (6) قم بالإدارة لفتح عكس اتجاه حركة عقارب الساعة. (7) قم بتحويل الزجاجة إلى حيث تخزين لبن الأم عند طريق التبديل إلى غطاء تخزين لبن الأم من Hegen. (8) تأكد من تجميع جميع الأغشية من خلال سداة غير قابلة للفك (بحيث يكون شعار Hegen مواجهاً للخارج) لضمان تخزين محكم الغلق.

يُرجى التأكد من استخدام الحلمة من خلال معدل التدفق الصحيح عند إرضاع الطفل. افحص جميع العناصر قبل كل استخدام. اسحب حلمة الرضاعة في كل الاتجاهات. تخلص منه عند ظهور البوادر الأولى للتلوث أو الضعف. نوصي باستبدال الحلمات كل ٣ أشهر، لأسباب تتعلق بالسلامة والنظافة.

استخدم فقط الحلمات النظيفة مع زجاجات الرضاعة النظيفة.

لمزيد من المعلومات حول منتجاتنا، تفضل بزيارة

www.hegen.com

Copyright © Hegen

Hegen retains all intellectual property rights to this product and packaging. Including all designs, graphic images and text.
Any reproduction of materials is strictly prohibited and constitutes infringement.

All Rights Reserved.

Patent Pending

Hegen Pte Ltd
438A Alexandra Road
Block A Alexandra Technopark
Unit #02-01 Singapore 119967

EN14350



Art 416