



Become the first choice
in respiratory care.



Nasal Mask (N6)

A Remodelar la Imagen de Mascarilla Nasal

family cares



BMC Medical Co., Ltd.

Room 110, Tower A Fengyu Building, No.115 Fucheng Road, Haidian, 100036 Beijing, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel: +86-10-5166 3880 / Fax: +86-10-5166 3880 ext. 810 / en.bmc-medical.com

SC-02-22-02-004-V1.0



Nasal Mask (N6)

Características destacadas



Cojín debajo de la Nariz

El cojín innovador debajo de la nariz minimiza el contacto con la nariz para que no sea necesario ejercer presión sobre el puente nasal.

Ventilación Circular

La ventilación circular mantiene el ruido tan bajo como 20 dB (A) y, al mismo tiempo, protege a su compañero de cama para que el flujo de aire no lo moleste.



Diseño Modular

El marco principal es compatible con todos los tamaños de cojines.


Arnés Ajustable en Tres Puntos

El arnés ajustable es apto para la mayoría de los tamaños de cabeza. Gama más amplia, más inclusión.



Especificaciones técnicas

Curva Presión-Flujo

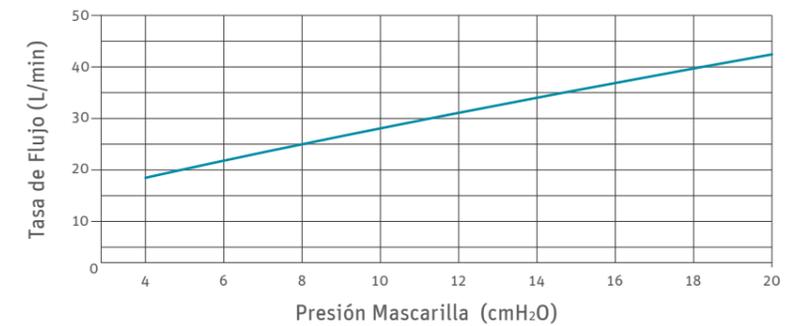

Presión (cmH ₂ O)	4	8	10	12	16	18	20
Tasa de Flujo (L/min)	17	25	28	31	37	40	42

Presión de Terapia De 4 a 20 cmH₂O

Resistencia Caída de presión medida (nominal)
a 50 L/min: 0.4 cmH₂O
a 100 L/min: 1.8 cmH₂O

Sonido VALORES DE EMISIÓN DE RUIDO DECLARADOS MEDIANTE DOS CIFRAS en cumplimiento con ISO 4871. El nivel de potencia acústica ponderado A de la máscara es 28 dBA, con una incertidumbre de 3 dBA. El nivel de presión acústica de la máscara a una distancia de 1 m es 20 dBA, con una incertidumbre de 3 dBA.