



## Descripción:

El Inogen One G5 es un concentrador de oxígeno portátil diseñado para ir cómodamente a donde necesite ir con mayor facilidad. Con su diseño compacto y liviano, el Inogen One G5 proporciona diferentes configuraciones de flujo variable de 1 a 6 y está diseñado para un uso de 24/7, lo que aumenta drásticamente la independencia de sus pacientes. Cuenta con el sensor de inspiración más sensible del mercado, donde la entrega de oxígeno se realiza cuando detecta una inspiración por parte del paciente, filtrando eficazmente el nitrógeno del aire, dejando oxígeno puro y concentrado, para una terapia de oxígeno efectiva.

## Especificaciones:

**Marca:** Inogen One.

**Modelo:** G5.

**Flujo de Oxígeno:** 1 (210 ml/min) a 6 (1260 ml/min).

**Uso:** Portátil 24/7.

**Pantalla:** Control de funciones simple, pantalla LCD de fácil lectura.

**Fuente de alimentación:** CA 100-240 V, 50-60 Hz.

**Nivel de ruido:** 38 dBA.

**Medidas:** Largo: 17.8 cm. Ancho: 7.8 cm. Altura: 20.5 cm

**Peso:** 2,2 kg

**Configuración:** Varios Idiomas.

**Garantía Equipo:** 3 Años.

**Garantía Accesorios:** 1 Año. (Columnas, Baterías, Cable de Alimentación, Fuente de Poder, Cargador de Automóvil, Bolso de Transporte).

La interfaz de usuario de este concentrador, ha sido diseñada con pantalla LCD fácil de leer y funciones de control simples, ofreciendo toda la información que necesita sobre la oxigenoterapia. Además, podrá consultar de un vistazo la configuración de oxígeno y el tiempo restante de la batería.



Clinicamente Validado



Liviano y fácil de transportar



Uso diario validado



Panel de control intuitivo.



*Autorizado y certificado para ser usado en vuelos nacionales e internacionales.*



**FAA CERTIFIED**

Inogen® cuenta con certificación FAA (Administración de Aviación Federal), lo que permite su utilización a bordo de las principales líneas aéreas.

*La pantalla indicará el porcentaje (%) o el tiempo remanente de uso estimado (en minutos).*


## Ajuste de Flujo:

AJUSTES DE FLUJO						
RESPIRACIONES POR MINUTO	1	2	3	4	5	6
15	14	28	42	56	70	84
20	11	21	32	42	53	63
25	8	17	25	34	42	50
30	7	14	21	28	35	42
35	6	12	18	24	30	36
40	5	11	16	21	26	32
ML / RESPIRACIONES +/- 15% SEGÚN LA ISO 80601-2-67						
VOLUMEN TOTAL POR MINUTOS (ML/MIN)	210	420	630	840	1050	1260



## Duración de la Batería:

FLUJO	BATERÍA SIMPLE (8 Celdas)	BATERÍA DOBLE (16 Celdas)
1	6 Hr 35 Min	13 Hr 28 Min
2	5 Hr 03 Min	10 Hr 22 Min
3	3 Hr 27 Min	7 Hr 01 Min
4	2 Hr 25 Min	4 Hr 55 Min
5	1 Hr 51 Min	3 Hr 48 Min
6	1 Hr 26 Min	2 Hr 58 Min

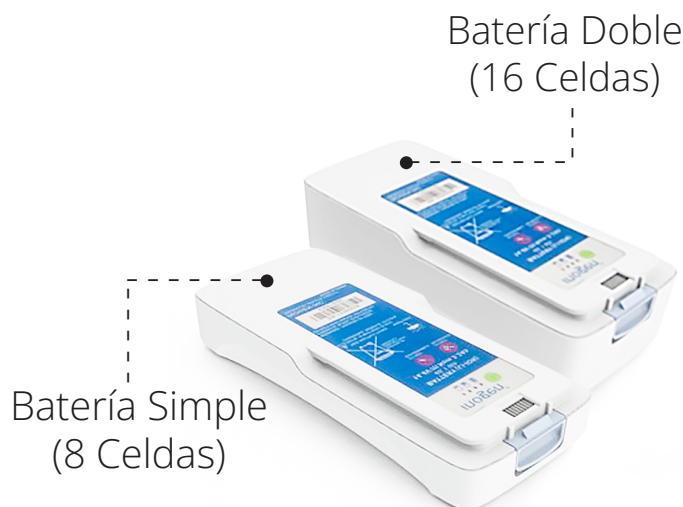

**⚠ Importante:** La autonomía de la batería depende de la configuración de oxígeno con la que se utilice. Cuanto mayor sea el ajuste de oxígeno, menor será la autonomía de la batería.

## Accesorios Opcionales: (Se venden por separado)



Batería Simple  
6.5 Hrs de Autonomía



Batería Doble  
13 Hrs de Autonomía



Cargador Externo  
Inogen G5



Mochila de  
Transporte



Carro de  
Transporte



**Paquete Incluye:** x1 Concentrador de Oxígeno Portátil, x1 Filtro externo, x1 Batería (*a elección*), x1 Cable de alimentación, x1 Fuente de Poder (BA-501), x1 Cargador para automóvil (Corriente Continua - BA-306), x1 Bolso de transporte (CA-500), x1 Manual de Usuario.