

CONCENTRADOR DE OXÍGENO PORTÁTIL
INOGEN ONE G3



DISTRIBUIDOR OFICIAL
INOGEN CHILE

INOGEN ONE®
Oxygen
Anytime. Anywhere.



RECUPERE SU INDEPENDENCIA CON LA FAMILIA DE CONCENTRADORES DE OXÍGENO PORTÁTILES

¡UNA SOLA SOLUCIÓN PARA TODO!

Los pacientes que necesitan un suplemento de oxígeno utilizan el concentrador de oxígeno **Inogen One® G3** por orden médica. El equipo suministra una concentración elevada de oxígeno (**alta calidad 94% de pureza**) y se emplea con una cánula nasal que transfiere el oxígeno desde el concentrador al paciente.





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

El Inogen One® G3 puede utilizarse en el **hogar, instituciones, vehículos, aviones y diversos entornos móviles**. Además los equipos Inogen son los **más silenciosos y confortables del mercado** y sus resultados clínicos en los pacientes son excelentes.

- 2,2 kilos (4,8 libras), con batería sencilla.
- Ajustes de flujo de **1 a 5**.
- Tan compacto y ligero que se puede llevar colgado del hombro.

Funcionamiento a Pulsos:

El **Inogen One® G3** cuenta con el sensor de inspiración **más sensible del mercado**, el cuál realiza la entrega de oxígeno solo cuando detecta una inspiración por parte del paciente.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Peso:	2,2 kilos (4,8 libras), con batería sencilla.
Tamaño:	Largo: 22,2 cm / Ancho: 7,6 cm / Alto: 18,4 cm
Sonoridad:	39 Decibelios (sonido ambiente, conversación)*
Duración Batería:	<ul style="list-style-type: none"> • Sencilla: hasta 4 horas* • Doble: hasta 8 horas*
Recarga Batería:	<ul style="list-style-type: none"> • Sencilla: 2 - 4 horas en corriente AC o DC • Doble: 4 - 8 horas en corriente AC o DC
AC:	Fuente de alimentación de 100 a 240V, 50 - 60Hz, autoajustable para permitir su utilización en cualquier parte del mundo.
DC:	Adaptador para carga en automóvil.
Pantalla:	LCD, con intuitivo panel de control.
Uso:	Estacionario, portátil y en viaje 24/7.

En ajuste 2.



AJUSTES DE FLUJO:

AJUSTE DE FLUJO	TASA DE FLUJO	10 BPM ML/BOLO	20 BPM ML/BOLO	25 BPM ML/BOLO
1	210 ML/MIN	21	11	8
2	420 ML/MIN	42	21	17
3	630 ML/MIN	63	32	25
4	840 ML/MIN	84	42	34
5	1050 ML/MIN	105	52,5	42

BPM= Beats Per Minute / Pulsos Por Minuto

DURACIÓN DE LA BATERÍA:

FLUJO	BATERÍA SIMPLE	BATERÍA DOBLE
1	4,5 hr	9,0 hr
2	4,0 hr	8,0 hr
3	3,0 hr	6,0 hr
4	2,0 hr	4,0 hr
5	1,5 hr	3,0 hr

Tiempo estimado en baterías nuevas y cargadas al 100%. La vida de la batería puede cambiar en el tiempo y en la frecuencia respiratoria. Si las baterías no duran lo mismo que cuando fueron compradas, lo más probable es que necesiten ser reemplazadas. *El equipo incluye 1 Batería Simple. Preguntar disponibilidad de stock para más baterías.*

ACCESORIOS DEL EQUIPO:

*

Accesorios Incluidos



CARGADOR CA

*



CARGADOR AUTO

*



BOLSO TRANSPORTE

*



CÁNULA

*



FILTRO EXTERNO

*

**

Batería a Elección Incluida:


- 1.) Batería Simple (x1).
- 2.) Batería Doble (x1).
- 3.) 1 Batería Simple + 1 Batería Doble.

**Precio varía según la elección de batería.
Opción 1, 2 o 3. Consultar disponibilidad**



BATERÍA SIMPLE

**

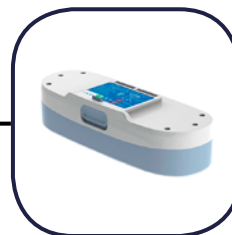

BATERÍA DOBLE

**

Accesorio Opcional (NO INCLUIDO)



CARGADOR EXTERNO



MOCHILA TRANSPORTE



**FAA
CERTIFIED**

Inogen® cuenta con **certificación FAA** (*Administración de Aviación Federal*), lo que permite su utilización a bordo de las principales líneas aéreas.



MADE IN USA



GARANTÍA	
EQUIPO	3 años
ACCESORIOS*	1 año

Batería, Fuente Alimentación, Bolso y Columnas