

Bausch

WE MAKE OCCLUSION VISIBLE



**MATERIALES PARA EVALUAR
LA ARTICULACIÓN Y OCLUSIÓN**







We make Occlusion visible.

Los fundadores de nuestra empresa, los odontólogos Dr. Jean Bausch y Dr. Hans Bausch, reconocieron desde muy temprano la necesidad de desarrollar un papel de articular sensible a la presión para lograr un registro de la oclusión lo más preciso posible.

La empresa Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG fabrica desde 1953 papeles de articular con coloración progresiva. El producto BK 01, de probada eficacia, fue el primer papel de articular que mostraba las diferentes fuerzas masticatorias con gradación de colores. Este principio de coloración progresiva sigue siendo hoy en día una herramienta fundamental para visualizar los contactos prematuros.

La precisión de marcado sobre las superficies a evaluar, como cerámicas, resinas o metales, constituye nuestra máxima prioridad.

Esto ha dado lugar con el tiempo a una amplia gama de dispositivos de comprobación de la articulación y la oclusión en diferentes grosores, formas y colores, lo que nos convierte en uno de los principales fabricantes del mundo.

Como empresa familiar en la segunda generación, seguimos apostando por la innovación y el desarrollo constante de nuevos productos. Por ejemplo, en el año 2019 presentamos el novedoso dispositivo digital de registro de la oclusión OccluSense® en la feria IDS de Colonia.

Dña. Evelyn Bausch, esposa del Dr. Hans Bausch, se incorporó a la empresa en el año 1961.

André y Peter Bausch (hijos del Dr. Hans Bausch y Evelyn Bausch) llevan las riendas de Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG desde 1998.

Todos los productos se fabrican estrictamente de acuerdo con las disposiciones del Reglamento europeo sobre productos sanitarios y bajo el control constante de nuestro sistema de garantía de calidad, según la norma DIN EN ISO 13485.

El presente folleto está dirigido principalmente al usuario especializado y pretende ayudarle a seleccionar el medio de comprobación más adecuado para cada aplicación.




- 1953 - Fundación de la compañía en Colonia, Alemania, con el primer papel de articular con coloración progresiva
- 1962 - Primera participación en la IDS de Colonia
- 1972 - Lanzamiento del papel de oclusión microfino (40 µm)
- 1974 - Traslado de la fabricación a Renania-Palatinado
- Comienza la fabricación de papeles con forma de herradura
- 1979 - IDS de Düsseldorf: lanzamiento al mercado de Arti-Fol®
- Fundación de la Bausch Dental Co. of America como oficina de representación
- 1983 - IDS de Múnich: Arti-Fol® de 8 µm en 4 colores
- 1986 - IDS de Colonia: indicador Arti-Spot® High-Spot
- 1994 - Fundación de Bausch Articulating Papers, Inc. en Nashua, NH, EE.UU.
- 1999 - IDS de Colonia: Arti-Fol® metallic de 12 µm
- 2003 - Fundación de Bausch Articulating Papers (Australasia) Pty. Ltd en Sídney, Australia
- 2007 - Fundación de Bausch Articulating Papers Japan K.K., en Osaka, Japón
- Fundación de Bausch Importação de Materiais Odontológicos Ltda. en São Paulo, Brasil
- 2009 - Ampliación del área de fabricación en Renania-Palatinado
- 2017 - IDS de Colonia: presentación del sistema OccluSense® con sensor de presión coloreado
- 2019 - IDS de Colonia: inicio de la comercialización de OccluSense®
- 2020 - Ampliación de las instalaciones de fabricación y de las salas para cursos de formación en Colonia
- 2021 - Fundación de Bausch Articulating Papers Co. Ltd. en Seúl, Corea del Sur

Índice

Oclusión - Factores influyentes - Consecuencias	6
Reconocimiento fiable de contactos prematuros	7
Materiales Bausch para evaluar la articulación y oclusión Resumen de grosores	8
OcluSense® - Registro digital de la oclusión	12
El principio de la coloración progresiva	16
Registro de la oclusión con el método de dos fases	18
Papeles de articular y de oclusión/Sedas de articular	20
Papeles de articular con coloración progresiva de 200 µm	22
Papel de articular PROGRESS 100 de 100µm	24
Seda de articular con coloración progresiva de 80 µm	26
Papeles de oclusión Bausch Arti-Check® microfinos de 40 µm	28
Folios para comprobar la oclusión de Bausch	30
Folio Shimstock Bausch Arti-Fol® metallic de 12 µm en negro/rojo	32
Folio Bausch Arti-Fol® metallic Complete 12 µm en negro/rojo	34
Folio Shimstock Bausch Arti-Fol® metallic de 12 µm	34
Folio de articular Arti-Fol® de 8 µm	36
Bausch Gnatho Film de 16 µm	38
Líquidos y sprays	40
Indicador Bausch Arti-Spot® High-Spot	42
Spray de oclusión Bausch Arti-Spray®	44
Marcador de puntos de presión Bausch Bio-Ink®-Flow	46
Barniz indicador oclusal Bausch Arti-Brux®	48
Material para registro de mordida Bausch Arti-Bite	50
Fleximeter® Strips de Bausch	54
Instrumentos y accesorios Bausch	58
Pinzas Bausch para papeles de articular y Arti-Fol®	60
Pinzas de mordida Bausch Accesorios	62

Oclusión— Factores influyentes— Consecuencias

Disfunción cráneomandibular

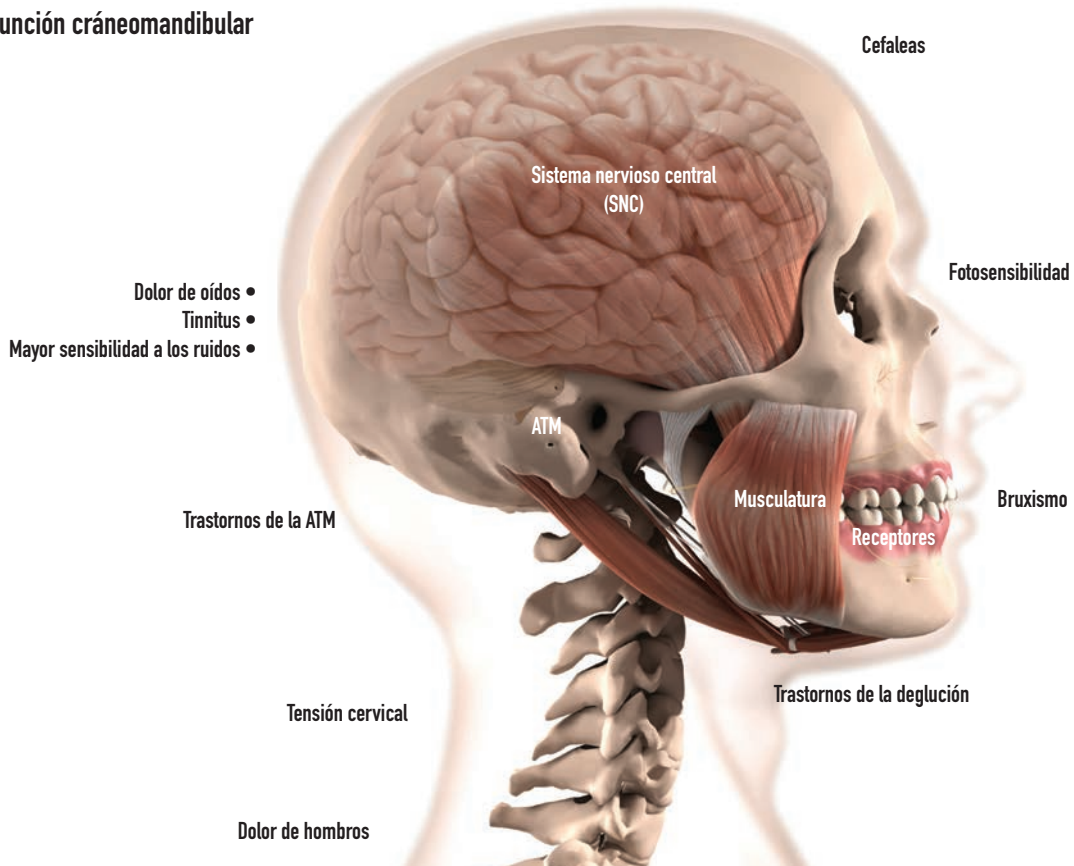

Reconocimiento fiable de contactos prematuros.

Por oclusión se entiende cualquier contacto que se produce entre los dientes maxilares y mandibulares.

La oclusión forma parte del sistema estomatognático, que es el conjunto anatómico formado por la articulación temporomandibular (ATM), la musculatura masticatoria, los nervios sensitivos, los presorreceptores y el sistema nervioso central.

Toda restauración, extracción, rehabilitación protésica o tratamiento de ortodoncia modifica la oclusión en cuanto a la estática y la dinámica y, por lo tanto, tiene consecuencias sobre el conjunto anatómico.

En este contexto, Bausch se ha propuesto desarrollar materiales para la evaluación de la oclusión dirigidos al usuario especializado, a fin de que pueda lograr restaurar la oclusión fisiológica individual para el paciente.

Para ello, no solo se debe considerar la comprobación de la oclusión estática, es decir, el contacto de los dientes sin movimiento mandibular en la posición de máxima intercuspidación, sino también los movimientos dinámicos. Los movimientos dinámicos, es decir, los contactos que se producen entre los dientes por el movimiento de la mandíbula, se pueden clasificar en guía anterior, guía canina y función de grupo.

Para evaluar los diferentes patrones de movimiento en toda la arcada dental, diseñamos los folios de 8 µm, 12 µm y 16 µm en diferentes colores.

De esta forma, se puede utilizar, por ejemplo:

Negro	para estática
Rojo	para laterotrusión
Verde	para mediotrusión
Azul	para protrusión

Cualquier cambio introducido en la oclusión habitual, es decir, en la oclusión estática adoptada habitualmente, puede provocar un cambio en el tono neuromuscular, que a su vez puede generar una posición de reposo adaptada y manifestarse en forma de trastorno de disfunción craneomandibular (DCM).

La interacción de los factores mencionados se muestra claramente en la imagen anterior.

Desde el punto de vista científico, se han definido varios conceptos de oclusión que pueden servir como base para reconstruir la oclusión. Sin embargo, solo deben entenderse como modelos, ya que no existe una "oclusión universal". Durante el tratamiento del paciente hay que centrarse más bien en su oclusión concreta teniendo en cuenta las condiciones biomecánicas.





























El uso consciente y sensato y de los diferentes papeles y folios de distintos grosores puede asegurar que no se pasen por alto interferencias importantes no detectables con la vista.

Los papeles de articular Bausch de 100 µm y 200 µm con coloración progresiva se utilizan para la localización general de los contactos estáticos, ya que son capaces de marcar sobre cualquier material y absorben la saliva. Pueden utilizarse en el consultorio dental y también en el laboratorio.

Los papeles de oclusión Arti-Check®, con un grosor de 40 µm, también pertenecen al grupo de los papeles de articular. Estos finos papeles están recubiertos por ambas caras con tintas líquidas y marcan con precisión gracias al bajo grosor del material, lo que reduce al mínimo los contactos borrosos.

A fin de incluir el nivel muscular, que influye en gran medida en la oclusión, desarrollamos el dispositivo de registro digital OccluSense®, capaz de mostrar la distribución cronológica de las fuerzas masticatorias en toda la arcada dental.

Finalmente, es importante realizar una comprobación final de la oclusión con dispositivos de registro adecuados para evitar las interferencias y descartar cualquier trastorno de la ATM relacionado con ellas.

	200 µm	azul	Impregnado	Doble cara	Papel de 200 µm
	200 µm	rojo	Impregnado	Doble cara	Papel de 200 µm
	100 µm	azul	Impregnado	Doble cara	Papel de 100 µm
	100 µm	rojo	Impregnado	Doble cara	Papel de 100 µm
	80 µm	azul	Impregnado	Doble cara	Seda de 80 µm
	80 µm	rojo	Impregnado	Doble cara	Seda de 80 µm
	80 µm	verde	Impregnado	Doble cara	Seda de 80 µm
	40 µm	azul/ azul	Recubierto	Doble cara	Papel de 20 µm + recubrimiento de 10µm + 10µm
	40 µm	rojo/ rojo	Recubierto	Doble cara	Papel de 20 µm + recubrimiento de 10µm + 10µm
	40 µm	azul/rojo	Recubierto	Doble cara	Papel de 20 µm + recubrimiento de 10µm + 10µm
	16µm	negro	Recubierto	Una cara	Película de 16 µm + recubrimiento de 6 µm
	16µm	rojo	Recubierto	Una cara	Película de 16 µm + recubrimiento de 6 µm
	16µm	verde	Recubierto	Una cara	Película de 16 µm + recubrimiento de 6 µm
	16µm	azul	Recubierto	Una cara	Película de 16 µm + recubrimiento de 6 µm
	12µm	negro/rojo	Recubierto	Doble cara	Folio de 12 µm + recubrimiento de 6 µm + 6 µm
	12µm	negro	Recubierto	Una cara	Folio de 12 µm + recubrimiento de 6 µm
	12µm	rojo	Recubierto	Una cara	Folio de 12 µm + recubrimiento de 6 µm
	12µm	verde	Recubierto	Una cara	Folio de 12 µm + recubrimiento de 6 µm
	12µm	azul	Recubierto	Una cara	Folio de 12 µm + recubrimiento de 6 µm
	12µm	no recubierto	No recubierto	-	Folio de 12 µm no recubierto
	8µm	negro	Recubierto	Una cara	Folio de 8 µm + recubrimiento de 6 µm
	8µm	rojo	Recubierto	Una cara	Folio de 8 µm + recubrimiento de 6 µm
	8µm	verde	Recubierto	Una cara	Folio de 8 µm + recubrimiento de 6 µm
	8µm	azul	Recubierto	Una cara	Folio de 8 µm + recubrimiento de 6 µm
	8µm	negro	Recubierto	Doble cara	Folio de 8 µm + recubrimiento de 6 µm + 6 µm
	8µm	rojo	Recubierto	Doble cara	Folio de 8 µm + recubrimiento de 6 µm + 6 µm
	8µm	verde	Recubierto	Doble cara	Folio de 8 µm + recubrimiento de 6 µm + 6 µm
	8µm	azul	Recubierto	Doble cara	Folio de 8 µm + recubrimiento de 6 µm + 6 µm

Materiales Bausch para evaluar la articulación y oclusión.

Desde 1953 nos hemos especializado en dispositivos para el registro de la oclusión, lo que nos convierte en un sólido interlocutor en el sector dental.

A lo largo del tiempo hemos ido adaptando nuestra gama de productos a las necesidades de nuestros usuarios profesionales, así como a los nuevos métodos de tratamiento y materiales dentales.

A principios de los setenta, además de los acreditados papeles y sedas de articular, incluimos papeles más delgados, con un grosor de tan solo 40 µm.

En esa misma década se desarrolla la rama odontológica de la gnatología, que hoy se refleja en el campo del diagnóstico funcional. Para este enfoque, se precisaban materiales de registro más finos. Desde entonces, ofrecemos folios resistentes al desgarro, finos y que marcan con gran precisión. Están disponibles en diferentes colores y grosores.

Además, brindamos colores líquidos de contacto, así como sprays de oclusión y otros indicadores cromáticos.

En el Salón Internacional de la Odontología IDS de 2019 presentamos el sistema OccluSense®, que añade una opción digital al registro clásico de la oclusión.



Papeles de articular de 200 µm



- coloración progresiva
- marcado óptimo sobre superficies oclusales húmedas
- marcado claramente visible sobre cerámica
- marcado por presión
- para comprobar la oclusión estática
- marcas grandes y bien visibles
- fieltro suave - se adapta bien a las superficies oclusales
- para la primera comprobación de contactos prematuros
- aptos para todos los materiales



Papeles de articular de 100 µm



- coloración progresiva
- marcado óptimo sobre superficies oclusales húmedas
- marcado claramente visible sobre cerámica
- marcado por presión
- para comprobar la oclusión estática y dinámica
- marcado puntual preciso y claramente visible
- material de fieltro muy suave y resistente al desgarro
- se adapta bien a las superficies oclusales
- para la primera comprobación de contactos prematuros
- aptos para todos los materiales



Sedas de articular de 80 µm



- coloración progresiva
- marcado óptimo sobre superficies oclusales húmedas
- marcado claramente visible sobre cerámica
- marcado por presión
- para comprobar la oclusión estática y dinámica
- marcado puntual preciso y claramente visible
- tejido de seda muy suave y resistente al desgarro - se adapta bien a las superficies oclusales
- para la primera comprobación de contactos prematuros
- aptos para todos los materiales
- recomendadas para la técnica Gerber



Papeles de articular de 40 µm



- marcado óptimo sobre superficies oclusales húmedas
- marcado claramente visible sobre cerámica
- marcado por presión e impacto
- para comprobar la oclusión estática y dinámica
- marcado puntual preciso y claramente visible
- de papel ultrafino
- aptos para todos los materiales
- marca puntos de contacto oclusales precisos



Gnatho Film de 16 µm



- película fina y flexible
- marca todos los contactos de forma muy precisa
- sin contactos borrosos
- marcado por impacto
- óptimo para comprobar la oclusión en laboratorio sobre modelos
- contactos puntiformes
- se adapta perfectamente a las superficies oclusales
- apta para todos los materiales
- película suave y extensible
- no se desgarra con el marcado o la tracción
- formatos grandes para comprobar la oclusión en el articulador en toda la arcada dental



Arti-Fol® metallic de 12 µm



- folio metalizado muy fino
- marca todos los contactos de forma muy precisa
- sin contactos borrosos
- marcado por impacto
- antiestática
- contactos nitidos
- se adapta bien a las superficies oclusales
- apta para todos los materiales
- no se desgarra con el marcado o la tracción
- marcado óptimo sobre materiales secos cerámicos
- también disponible en versión no recubierta (folio Shimstock)
- también disponible en rollos de 75 mm de ancho



Arti-Fol® de 8 µm




- folio muy fino
- marca todos los contactos de forma muy precisa
- sin contactos borrosos
- marcado por impacto
- contactos nitidos
- se adapta bien a las superficies oclusales
- apta para todos los materiales
- no se desgarra con el marcado o la tracción
- también disponible en rollos de 75 mm de ancho
- con recubrimiento en una o dos caras



OccluSense® de 60 µm

- representación de las fuerzas masticatorias, marcadas sobre los dientes y de forma digital en forma de gráfico de barras
- las relaciones cúspide-fosa muy marcadas o poco profundas se visualizan mediante los diferentes colores de las barras
- examen oclusal ampliado de la oclusión estática y dinámica
- visualización de las fuerzas axiales en las restauraciones sobre implantes y en rehabilitaciones protésicas
- detección de contactos prematuros
- mejora la comunicación e información dada al paciente
- sensor de presión electrónico: 60 µm de grosor, flexible y con recubrimiento de color
- representación porcentual de la distribución de las fuerzas masticatorias
- documentación sencilla a través de la App OccluSense® para iPad

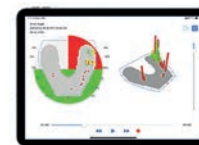



CELLERANT
BEST OF CLASS
TECHNOLOGY AWARD
2019



Bausch OccluSense® – Registro digital de la oclusión.

Obtener una representación precisa de los contactos oclusales fue una de las principales exigencias que nos marcamos cuando desarrollamos OccluSense®. El sensor cromático de OccluSense®, al igual que nuestros probados papeles y folios de articular, tiene la cualidad de marcar de forma clara y nítida.

OccluSense® no solo permite visualizar los contactos oclusales finales en términos estáticos y dinámicos, sino también registrar la progresión temporal hasta completar el movimiento de oclusión.


La interpretación de las fuerzas oclusales registradas por OccluSense® difiere de la de los materiales clásicos de registro de la oclusión, ya que proporciona mucha más información que éstos de manera rápida. Por ejemplo, el registro de los contactos oclusales durante el movimiento de la mandíbula desde el primer contacto dentario hasta la posición de máxima intercuspidad. OccluSense® de Bausch permite a todos los odontólogos registrar estas situaciones oclusales y evaluarlas paso a paso.

Nuestro sistema OccluSense® fue galardonado con el *premio Cellerant Best of Class Technology* en el Congreso de la ADA/FDI de 2019 en San Francisco.

En la OE-A Competition de 2021, organizada por la Organic and Printed Electronics Association (OE-A), nuestro sistema OccluSense® fue el ganador en la categoría de “*Nuevos Productos*”.

Para más información sobre el sistema OccluSense®, visite:

www.occlusense.com

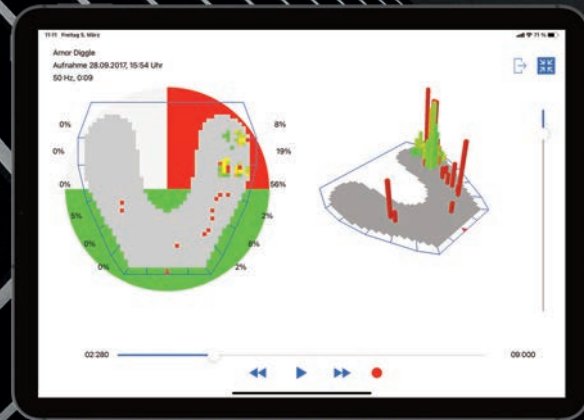



Registro digital de la oclusión en el enfoque holístico.

El nuevo y premiado producto "OccluSense®" de Bausch, de fácil manejo, combina el registro tradicional de la distribución de las fuerzas masticatorias sobre las superficies oclusales con el digital.

El dispositivo OccluSense®, con su sensor de presión desechable de 60 µm con recubrimiento rojo, se utiliza como un folio de registro de la oclusión convencional y brinda las siguientes funcionalidades:

- Comprobación de toda la arcada dental
- Representación cronológica de la distribución de las fuerzas masticatorias
- Representación de la distribución porcentual de las fuerzas masticatorias

- Visualización de los movimientos de laterotrusión y las posibles interferencias en el lado de mediotrusión
- Representación analógica y digital de las relaciones oclusales
- Documentación gráfica de los pasos del tratamiento mediante la comparación del antes y el después
- Se puede utilizar, por ejemplo, para el tratamiento con férulas, restauraciones con implantes, o restauraciones mayores en el campo de la osteopatía y la fisioterapia.

El sistema OccluSense®: Dispositivo de mano OccluSense®

Dispositivo de mano (con baterías) para la introducción de los sensores

Cargador OccluSense®

Cargador inductivo para carga inalámbrica


Sensor OccluSense®: Sensor electrónico de presión

- 60 µm de grosor
- flexible
- recubrimiento rojo
- permite registrar las relaciones de las fuerzas oclusales en 256 niveles de presión
- comprueba la oclusión tanto estática como dinámica

Para más información sobre el sistema OccluSense® visite www.occlusense.com

				REF
		Set		BK 5000
	L	25 x		BK 5025
	XL	25 x		BK 5035


El principio de la coloración progresiva.

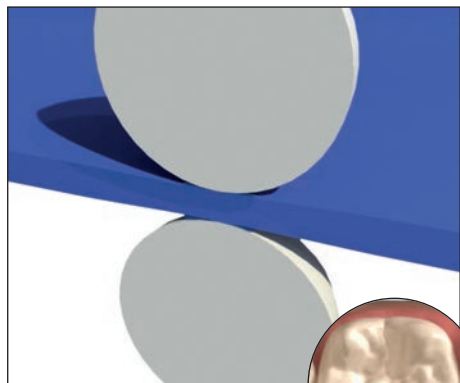

Presión ligera


Los contactos dentales fisiológicos se reconocen con el principio de la coloración progresiva.

Estas marcas no representan interferencias.

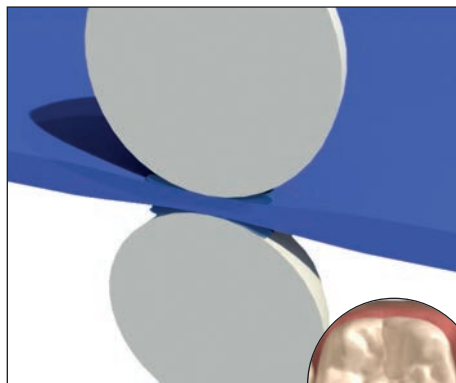

Presión fuerte

Con una presión de masticación más fuerte, se desprende más color del material y los puntos de contacto se marcan con una coloración más oscura. Aparece el marcado típico de nuestros materiales de registro progresivos, en el que el color desprendido dibuja una forma de círculo alrededor del punto de contacto.

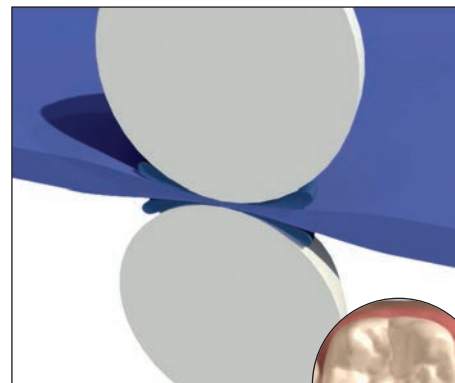

Presión máxima

En el caso de máxima intercuspidad o interferencia, este efecto es aún más visible, ya que en el centro de la marca el punto de contacto real apenas se colorea, sino que se rodea de un anillo de color oscuro.

El principio de la coloración progresiva.



Los papeles de articular de 200 µm, los papeles "PROGRESS 100" de 100 µm y las sedas de articular de 80 µm presentan la propiedad de la coloración progresiva.



Los papeles de articular y las sedas con coloración progresiva de Bausch son adecuados para representar la oclusión estática.

La estructura esponjosa del suave fieltro o de la seda almacena la tinta, la cual se desprende cuando se ejerce presión.

Con estos productos se marcan todos los contactos dentarios.

En este contexto, "coloración progresiva" significa que, cuanto mayor es la fuerza de masticación, más color se desprende del material y se transfiere a las superficies oclusales.


El adhesivo Transculase® incluido en la formulación del color permite una mejor adhesión del color a los diferentes materiales así como a la dentición natural. El papel de articular sensible a la presión proporciona un relieve preciso de la distribución de las fuerzas masticatorias.

Así, nuestros materiales de registro progresivos son ideales para las superficies oclusales humedecidas por la saliva.

Para representar de forma precisa los contactos oclusales recomendamos utilizar una combinación de diferentes dispositivos de registro (véase la página 18).



Registro de la oclusión con el método de las dos fases

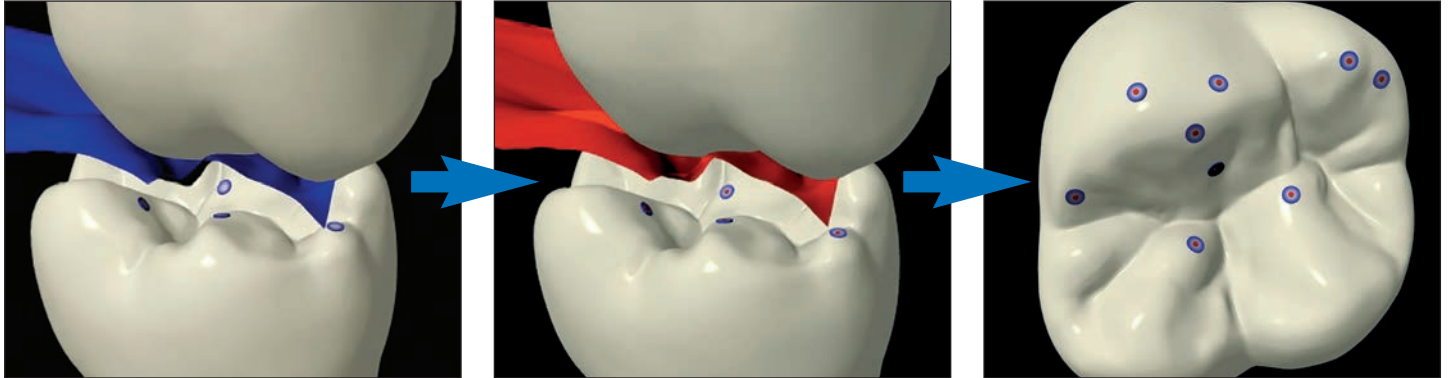

Para que los puntos de contacto sean más visibles incluso en las superficies oclusales humedecidas por la saliva, recomendamos utilizar los materiales de registro progresivos en combinación con folios más finos.

En un primer paso, se comprueba la oclusión con papel de articular de 200 µm o con papel "PROGRESS 100" de 100 µm. Estos papeles absorben la saliva y crean así una

base perfecta para marcar de manera nítida los puntos de contacto en un segundo paso con folios Arti-Fol® metálic de 12 µm o Arti-Fol® de 8 µm.

Las ventajas de este método de dos fases son:

- Representación diferenciada de puntos y superficies oclusales
- Visualización de alto contraste gracias a los diferentes colores

- Marcado de color mejorado con los folios oclusales sobre las superficies humedecidas por la saliva por la transferencia previa del componente adhesivo Transculase®



Papeles de articular y de oclusión Bausch Sedas de articular Bausch

Nuestro papel de articular con coloración progresiva representó la piedra angular de la fundación de nuestra empresa en el año 1953.














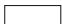


Poco después, lanzamos las sedas de articular de 80 μm de grosor, que todavía se utilizan hoy en día, sobre todo para comprobar la oclusión en el laboratorio dental.

En 1972 añadimos a nuestro surtido los papeles de oclusión Bausch microfinos de 40 μm .


En el año 2000 lanzamos el producto PROGRESS 100, el papel de articular con coloración progresiva de 100 μm .

Papeles de articular Bausch con coloración progresiva de 200 µm



				REF
	52 mm x 18 mm	300 x		BK 01
	52 mm x 18 mm	300 x		BK 1001 
	52 mm x 18 mm	300 x		BK 02
	52 mm x 18 mm	300 x		BK 1002 
	52 mm x 18 mm	50 x		BK 03
	52 mm x 18 mm	50 x		BK 04
	52 mm x 18 mm	300 x		BK 05

 = envases de recambio ecológicos

 = recomendado para uso en el consultorio

 = recomendado para uso en el laboratorio

Papeles de articular Bausch con coloración progresiva de 200 µm



Papeles de articular Bausch con coloración progresiva de 200 µm

El papel de articular de Bausch con coloración progresiva de 200 µm muestra las diferentes fuerzas de mordida mediante marcado en función de la fuerza masticatoria:

- PRESIÓN LIGERA** - marcas claras
- PRESIÓN FUERTE** - marcas más oscuras
- PRESIÓN MÁXIMA** - anillo más oscuro alrededor del contacto oclusal

El odontólogo obtiene una imagen precisa de la distribución de las fuerzas masticatorias. Los contactos prematuros se hacen visibles.


Tiras |  |  |









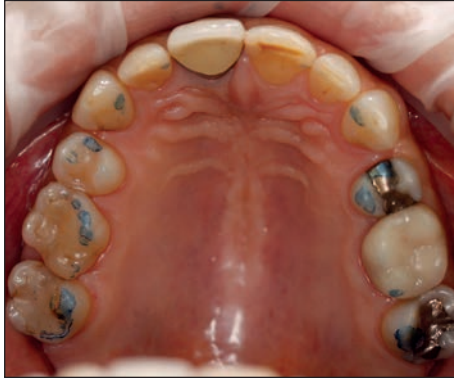




Uso por ejemplo, para obturaciones, coronas y puentes (odontología restauradora y funcional)

Forma de herradura |  |  |

Uso por ejemplo, para férulas de descarga, prótesis totales, registro de toda la arcada dental en el articulador y el paciente

Papel de articular Bausch PROGRESS 100 de 100 µm



				REF
	52 mm x 18 mm	300 x		BK 51
	52 mm x 18 mm	300 x		BK 52
		50 x		BK 53
		50 x		BK 54
	52 mm x 20 mm	50 x		BK 57
	52 mm x 20 mm	50 x		BK 58

 = recomendado para uso en el consultorio

 = recomendado para uso en el laboratorio

Papel de articular Bausch PROGRESS 100 de 100 µm



Papel de articular de coloración progresiva Bausch PROGRESS 100 de 100 µm

Este papel suave, reforzado con fibras y con alta capacidad de almacenamiento cromático, se adapta exactamente a las superficies oclusales.

Con su coloración progresiva, marca con precisión los puntos de los contactos oclusales.

Gracias a la combinación única con el adhesivo Transcuse® y un papel fino, se muestran con precisión los contactos y las superficies oclusales sobre superficies

pulidas a alto brillo, la sustancia dentaria natural, las aleaciones metálicas o los materiales cerámicos.

Forma de herradura |  |  |






Uso por ejemplo, para férulas de descarga, prótesis totales, registros de toda la arcada dental en el articulador y el paciente


Tiras |  |  |

Uso por ejemplo, para obturaciones, coronas y puentes (odontología restauradora y funcional)

Seda de articular Bausch con coloración progresiva de 80 µm



			REF
	80 mm x 3 m		BK 06
	80 mm x 3 m		BK 876
	80 mm x 3 m		BK 877
	16 mm x 10 m		BK 07
	16 mm x 10 m		BK 08

 = recomendado para uso en el consultorio

 = recomendado para uso en el laboratorio

Seda de articular Bausch con coloración progresiva de 80 μm



Seda de articular Bausch con coloración progresiva de 80 μm

La seda de articular Bausch es un producto textil de alta calidad con unas propiedades comparables al papel de articular de coloración progresiva de 200 μm . Su tejido es resistente al desgarro y se adapta de forma óptima a las cúspides y fosas gracias a su mínimo grosor y a su flexibilidad.

El mercado de las sedas de articular es extremadamente vivo y preciso.














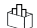














La seda de articular constituye desde hace décadas un dispositivo de registro de la oclusión para la tecnología dental y la odontología probado para registrar las superficies oclusales.

Rollos |  | 


Uso por ejemplo para férulas de descarga, prótesis totales, registro de toda la arcada dental en el articulador y el paciente

Papeles de oclusión Bausch Arti-Check® microfinos de 40 µm



				REF	
	103 mm x 20 mm	200 x		BK 09	
	103 mm x 20 mm	200 x		BK 10	
	100 mm x 70 mm	100 x		BK 11	
	100 mm x 70 mm	100 x		BK 12	
		16 mm x 15 m		BK 13	BK 1013
		16 mm x 15 m		BK 14	BK 1014
		22 mm x 10 m		BK 15	BK 1015
		22 mm x 10 m		BK 16	BK 1016
		150 x		BK 17	
		150 x		BK 18	
	52 mm x 20 mm	200 x		BK 61	
	52 mm x 20 mm	200 x		BK 62	
	52 mm x 20 mm	200 x		BK 63	
	103 mm x 20 mm	200 x		BK 80	
		150 x		BK 81	

 = envases de recambio ecológicos

 = recomendado para uso en el consultorio

 = recomendado para uso en el laboratorio

Papeles de oclusión Bausch Arti-Check® microfinos de 40 µm



Papeles de oclusión Bausch Arti-Check® microfinos de 40 µm

Los papeles de oclusión Bausch de 40 µm son papeles muy finos recubiertos por ambas caras con tintas líquidas. Debido a su pequeño grosor, estos papeles muestran un comportamiento de marcado extremadamente preciso. De este modo, se reducen significativamente los contactos defectuosos o borrosos.

Su recubrimiento especial con tintas líquidas permite marcar claramente todos los contactos oclusales, incluso sobre materiales difíciles de comprobar, como las cerá-

micas, las aleaciones metálicas, las resinas y las superficies oclusales humedecidas con saliva.

Su recubrimiento cromático especial consiste en una infinidad de pequeñas microcápsulas rellenas de pigmentos. Incluso con una ligera presión de masticación, las cápsulas se abren y liberan el color de forma claramente visible. También permiten marcar de forma repetida, ya que el recubrimiento de color posee un volumen de tinta elevado.

Los papeles Bausch Arti-Check® microfinos, BK 63, BK 80 y BK 81 bicolor, son perfectos para visualizar la oclusión estática y dinámica.

Arcos | 

Uso por ejemplo, para férulas de descarga, prótesis totales, registro de toda la arcada dental en el articulador

Forma de herradura |  | 

Uso por ejemplo, para férulas de descarga, prótesis totales, registros de toda la arcada dental en el articulador y el paciente

Tiras |  | 

Uso por ejemplo, para obturaciones, coronas y puentes (odontología restauradora y funcional)

Rollos |  | 

Dispensación limpia y económica desde el rollo, por ejemplo, para obturaciones, coronas y puentes (odontología restauradora y funcional)



Folios para comprobar la oclusión de Bausch

En los años 70, la gnatología se convirtió en una parte importante de la odontología. Para satisfacer las necesidades de los expertos en el campo del diagnóstico funcional, en 1979 añadimos a nuestra gama folios finos para la oclusión.


En 1983 presentamos Arti-Fol® de 8 µm en cuatro colores diferentes. Estos folios están disponibles con recubrimiento de color en una o dos caras.









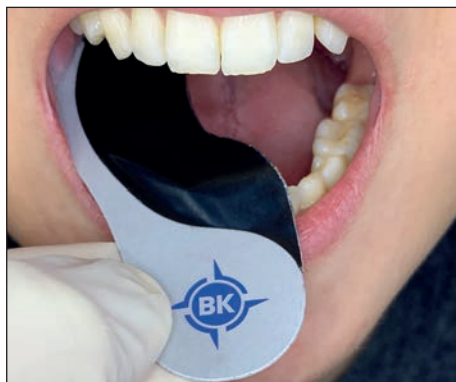




En el año 1999 añadimos a nuestro surtido de folios el Arti-Fol® metallic de 12 µm.

La película de polietileno flexible Gnatho Film de 16 µm la incorporamos al catálogo en el año 2002.

En 2020 añadimos el producto Arti-Fol® metallic Complete BK 328 a Nuestra gama de productos.

Folio Shimstock Bausch Arti-Fol® metallic de 12 µm en negro/rojo



				REF
		22 mm x 20 m		BK 28
		22 mm x 20 m		BK 1028 
		100 x		BK 328

 = envases de recambio ecológicos

 = recomendado para uso en el consultorio

 = recomendado para uso en el laboratorio

Folio Shimstock Bausch Arti-Fol® metallic de 12 µm en negro/rojo



Arti-Fol® metallic de 12 µm en negro/rojo

Arti-Fol® metallic negro/rojo es un folio de registro de la oclusión que consiste en una lámina de poliéster metalizada (lámina Shimstock) de 12 µm de grosor y un recubrimiento de color de doble cara.

Este folio se caracteriza por su flexibilidad, su resistencia al desgarro y su reducida carga estática. El bajo grosor del material permite una gran aproximación de los antagonistas.

Rollos |  |

Dispensación limpia y económica desde el rollo, por ejemplo, para obturaciones, coronas y puentes (odontología restauradora y funcional)

Arti-Fol® metallic Complete de 12 µm

Arti-Fol® metallic Complete BK 328 combina el probado folio Arti-Fol® metallic en negro/rojo con un nuevo e higiénico soporte de cartón.

Gracias a su forma especial, Arti-Fol® metallic Complete puede utilizarse solo en el lado izquierdo o derecho o conjuntamente para toda la arcada dental.

















Cada paquete contiene 100 soportes, sellados higiénicamente de 10 en 10.

Tiras con soporte de cartón laminado |  |

Aplicación higiénica sin uso de instrumento de sujeción, por ejemplo, para obturaciones, coronas y puentes (odontología restauradora y funcional)

Folio Shimstock Bausch Arti-Fol® metallic de 12 µm



				REF
		22 mm x 20 m		BK 30
		22 mm x 20 m		BK 31
		22 mm x 20 m		BK 32
		22 mm x 20 m		BK 33
	8 mm x 50 mm	100 x		BK 35
	8 mm x 50 mm	100 x		BK 38
	16 mm x 20 m			BK 39
	75 mm x 20 m			BK 730
	75 mm x 20 m			BK 731



= recomendado para uso en el consultorio



= recomendado para uso en el laboratorio

Folio Shimstock Bausch Arti-Fol® metallic de 12 µm



Folio Shimstock Bausch Arti-Fol® metallic de 12 µm



Arti-Fol®metallic en negro/rojo es un folio de registro de la oclusión que consiste en una lámina de poliéster metalizada (lámina Shimstock) de 12 µm de grosor y un recubrimiento de color de una o doble cara.



Este folio se caracteriza por su flexibilidad, su resistencia al desgarrar y su reducida carga estática. El bajo grosor del material permite una gran aproximación de los antagonistas.

El folio marca con precisión los contactos de oclusión en todos los materiales. De este modo, se reducen considerablemente los contactos borrosos o defectuosos.

El reverso metalizado del folio evita la confusión entre el lado no recubierto y el recubierto con color. Además, la metalización confiere al folio propiedades antiestáticas. Las tiras precortadas de 8 mm de ancho de la variante Arti-Fol® metallic BK 35 en combinación con la pinza Arti-Fol® BK 145 (página 61) son especialmente adecuadas para comprobar los contactos interproximales cuando se colocan puentes o coronas.

























Como complemento a Arti-Fol® metallic, también ofrecemos el folio Shimstock clásico sin recubrimiento de color en 8 mm y en 16 mm de ancho. Puede descargar un protocolo Shimstock predefinido en nuestra página web www.bauschdental.com/downloads.

Rollos de 22 mm de ancho |  |  |
Dispensación limpia y económica desde el rollo, por ejemplo, para obturaciones, coronas y puentes (odontología restauradora y funcional)


Rollos de 75 mm de ancho |  |  |
Uso por ejemplo, para férulas de descarga, prótesis totales, registro de toda la arcada dental en el articulador

Folio de articular Arti-Fol® de 8 µm



				REF	
	22 mm x 20 m			BK 20	BK 1020
	22 mm x 20 m			BK 21	BK 1021
	22 mm x 20 m			BK 22	BK 1022
	22 mm x 20 m			BK 23	BK 1023
	22 mm x 20 m			BK 24	BK 1024
	22 mm x 20 m			BK 25	BK 1025
	22 mm x 20 m			BK 26	BK 1026
	22 mm x 20 m			BK 27	BK 1027
	75 mm x 20 m			BK 70	
	75 mm x 20 m			BK 71	
	75 mm x 20 m			BK 72	
	75 mm x 20 m			BK 73	
	75 mm x 15 m			BK 74	
	75 mm x 15 m			BK 75	
	75 mm x 15 m			BK 76	
	75 mm x 15 m			BK 77	
	75 mm	1 x		BK 137	
	22 mm	1 x		BK 139	

 = envases de recambio ecológicos

 = recomendado para uso en el consultorio

 = recomendado para uso en el laboratorio

Folio de articular Arti-Fol® de 8 µm



Folio de articular Arti-Fol® de 8 µm

Arti-Fol® de 8 µm es un folio de registro de la oclusión muy fino que consiste en una lámina de poliéster de 8 µm de grosor con un recubrimiento de color de una o dos caras.

El fino recubrimiento de tinta está formado por ceras y pigmentos enriquecidos con componentes hidrófilos para mejorar el marcado sobre diferentes materiales. Este folio se caracteriza por su escaso grosor y permite una representación exacta y de contorno nítido de los contactos oclusales.

Los folios de registro de la oclusión Bausch Arti-Fol® son especialmente adecuados para visualizar la oclusión estática y dinámica en varios colores. Existen cuatro colores diferentes para representar la estática y los diferentes movimientos funcionales (protrusión, laterotrusión y mediotrusión).

Los diferentes colores también pueden utilizarse para conceptos de encerado biomecánico en el laboratorio.

Rollos de 22 mm de ancho |  | 

Dispensación limpia y económica desde el rollo, por ejemplo, para obturaciones, coronas y puentes (odontología restauradora y funcional)

Folio de articular Arti-Fol® de 8 µm en 75 mm de ancho
Los folios de registro de la oclusión están disponibles en cuatro colores y también en 75 mm de ancho. Los folios anchos se utilizan principalmente en el laboratorio.















Para facilitar la manipulación en el articulador ofrecemos nuestro soporte en Y especial para folios Bausch BK 140 (página 63).

Rollos de 75 mm de ancho | 

Uso por ejemplo, para férulas de descarga, prótesis totales, registro de toda la arcada dental en el articulador

Bausch Gnatho-Film de 16µm



				REF
	20 mm x 60 mm	50 x		BK 120
	20 mm x 60 mm	50 x		BK 121
	20 mm x 60 mm	50 x		BK 122
	20 mm x 60 mm	50 x		BK 123
	70 mm x 100 mm	50 x		BK 170
	70 mm x 100 mm	50 x		BK 171
	70 mm x 100 mm	50 x		BK 172
	70 mm x 100 mm	50 x		BK 173



= recomendado para uso en el consultorio



= recomendado para uso en el laboratorio

Bausch Gnatho-Film de 16µm



Bausch Gnatho-Film de 16µm

Bausch Gnatho Film es una película delgada de 16 µm, suave, especialmente extensible y resistente al desgarro con recubrimiento de color por una cara en cuatro colores diferentes.

Esta película se adapta de forma óptima al relieve oclusal y marca con precisión todos los contactos oclusales. Especialmente concebida para el análisis de modelos en el articulador, esta película se caracteriza por un marcado limpio y exacto, por ejemplo, sobre modelos de escayola.

Hojas |  |

Uso por ejemplo, para férulas de descarga, prótesis totales, registro de toda la arcada dental en el articulador, análisis de modelos

Tiras |  |  |

Uso por ejemplo, para obturaciones, coronas y puentes (odontología restauradora y funcional)



Bausch
Occlusion-Spray
Occlusion-Spray

75 ml (REF BK 288)
grün | green | azuloscuro

Arti-Spot 2

Arti-Spot® 2

High-Spot Indikator
rot | 15 ml | REF BK 86

DR. JEAN BAUSCH GMBH & CO. KG • OSKAR-SCHINDLE
50749 KÖLN • MADE IN GERMANY • WWW.BAUSCHDE.COM

Arti-Spot® 2
High-Spot Indikator | rot | red | 15ml

Líquidos y sprays


Ofrecemos elementos auxiliares para la adaptación de restauraciones protésicas desde la década de los ochenta:







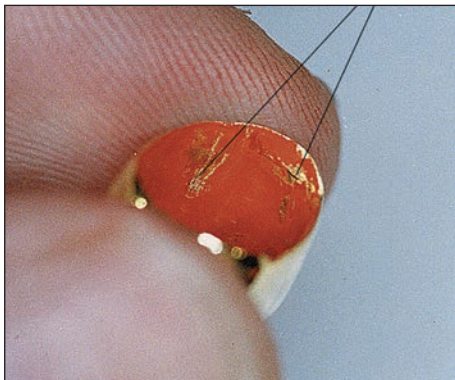

- Arti-Spot® color de contacto para comprobar la precisión de ajuste de coronas, fácil de aplicar
- Arti-Spray® para los mismos campos de aplicación en envase aerosol

En el año 2016 lanzamos Bio-Ink-Flow para marcar los puntos de presión.

En esa misma ocasión, pero destinado a estudios más largos, añadimos el barniz indicador oclusal Arti-Brux®.

Indicador Bausch Arti-Spot® High-Spot



				REF
 Arti-Spot® 1		15 ml		BK 85
Arti-Spot® 2		15 ml		BK 86
Arti-Spot® 3		15 ml		BK 87



= recomendado para uso en el consultorio



= recomendado para uso en el laboratorio

Indicador Bausch Arti-Spot® High-Spot



Indicador Bausch Arti-Spot® High-Spot

Arti-Spot® es un color líquido de contacto ideado para comprobar la precisión de ajuste de coronas, inlays, onlays, coronas telescópicas, ganchos y superficies de fricción.

Arti-Spot® se aplica con un pincel sobre la superficie a estudiar. Al cabo de unos segundos, deja una fina película de aproximadamente 3 µm por evaporación del disolvente. Cada contacto destruirá la capa de pintura exactamente en el punto de contacto. La superficie de contacto se vuelve entonces claramente visible en este punto.

En tres colores diferentes para permitir una visualización de alto contraste sobre diferentes materiales.













Arti-Spot® se puede eliminar fácilmente después del uso con agua caliente mediante abrasión mecánica (cepillo de dientes o cepillo interproximal). Con etanol, alcohol isopropílico o chorro de vapor también se pueden disolver los últimos restos de color. Arti-Spot® puede eliminarse de los modelos de yeso sellados con la ayuda de un cepillo fino.

Frasco con pincel |  |  |

Aplicación precisa sobre la superficie a comprobar (no apto para aplicación directa intraoral), por ejemplo, para coronas, inlays, onlays, coronas telescópicas, ganchos y superficies de fricción.

Spray de oclusión Bausch Arti-Spray®



				REF
	Arti-Spray®	75 ml		BK 285
	Arti-Spray®	75 ml		BK 286
	Arti-Spray®	75 ml		BK 287
	Arti-Spray®	75 ml		BK 288



= recomendado para uso en el consultorio



= recomendado para uso en el laboratorio

Spray de oclusión Bausch Arti-Spray®



Spray de oclusión Bausch Arti-Spray®

Arti-Spray® es un spray de marcado homogéneo en cuatro colores diferentes para la comprobación de los contactos oclusales, así como de la precisión de ajuste de coronas, puentes, prótesis y prótesis parciales.

Arti-Spray® se puede dosificar con precisión y forma una fina capa pulverulenta de color que puede eliminarse fácilmente con agua o chorro de vapor sin dejar ningún residuo. Arti-Spray® se pulveriza ligeramente sobre la superficie oclusal o las caras internas de la corona o el puente a una distancia de 3 a 5 cm.


Todos los puntos de contacto son fácilmente reconocibles como defectos en la capa de tinta. En caso necesario, marque los puntos de contacto con un lápiz de color o con el folio de registro Bausch Arti-Fol® para su posterior comprobación.







Arti-Spray® también puede utilizarse para contactos interproximales cuando se adaptan coronas o puentes.

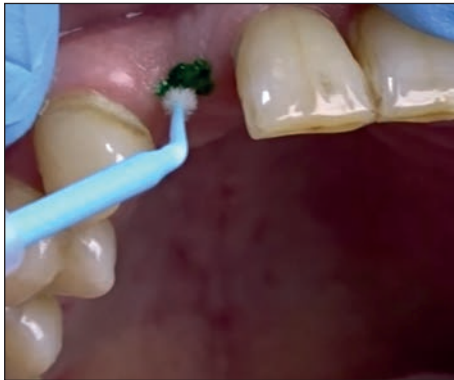Envase aerosol |  |  |

Aplicación rápida sobre la superficie a comprobar (no apto para aplicación directa intraoral), por ejemplo, para coronas, inlays, onlays, coronas telescópicas, ganchos y superficies de fricción.

Marcador de puntos de presión Bausch Bio-Ink®-Flow



				REF
	Set	1 ml	●	BK 205
		1 ml	●	BK 206



= recomendado para uso en el consultorio

Marcador de puntos de presión Bausch Bio-Ink®-Flow




Marcador de puntos de presión Bausch Bio-Ink®-Flow


Bio-Ink®-Flow es una pasta verde de fácil aplicación y alta viscosidad para visualizar los puntos de presión en la mucosa y el marcado de la prótesis.

Bio-Ink®-Flow también puede utilizarse para marcar la línea AH, los bordes de la prótesis y el pliegue de la mucosa.

Las zonas correspondientes se colorean con Bio-Ink®-Flow






sobre la mucosa previamente seca. Cuando se inserta la prótesis seca, el color aplicado sobre el punto de presión se transfiere a la parte inferior de la prótesis, la cual puede volver a adaptarse.

Jeringa de aplicación con cánula |  |
Juego BK 205: incluye aplicadores desechables, soporte de aplicadores. Aplicación precisa en la mucosa

Jeringa de aplicación con cánula |  |
BK 206: Aplicación precisa en la mucosa

Barniz indicador oclusal Bausch Arti-Brux®

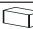

				REF
—	Applicador	0,15 ml	●	BK 88
	Set	15 ml	●	BK 89



= recomendado para uso en el consultorio

Barniz indicador oclusal Bausch Arti-BruX®




Barniz indicador oclusal Bausch Arti-BruX®

Arti-BruX® es un barniz rojo de registro de la oclusión para visualizar patrones de movimiento en restauraciones y prótesis pulidas a alto brillo, así como en férulas de descarga.

El revestimiento de color fino y uniforme, a prueba de saliva, permite visualizar la oclusión dinámica del paciente durante un período de tiempo más largo (máx. 24 horas).

Así, las parafunciones (el bruxismo) pueden hacerse visibles en las férulas de descarga duras o en las restaura-

ciones protésicas. También se pueden comprobar específicamente parámetros de oclusión como la guía canina anterior en las férulas.

Frasco con pinceles desechables BK 89 |  | Aplicación precisa en restauraciones y prótesis, así como en férulas de descarga

Aplicador desechable BK 88 |  | Aplicación precisa en restauraciones y prótesis, así como en férulas de descarga












NUEVO:
material para registro de mordida Bausch Arti-Bite

En 2021 completamos nuestra gama con el material de registro de mordida Arti-Bite de vinil polisiloxano.

Material para registro de mordida Bausch Arti-Bite



				REF
 4 x 50 ml	 12 x		BK 400	
2 x 50 ml	 14 x		BK 402	



= recomendado para uso en el consultorio

Material para registro de mordida Bausch Arti-Bite



Material para registro de mordida Bausch Arti-Bite

Basándonos en décadas de experiencia en la fabricación de dispositivos de comprobación de la articulación y la oclusión, hemos añadido a nuestra gama de productos el Arti-Bite, un registro de mordida intraoral de vinil polisiloxano.

El material es adecuado para registrar las relaciones oclusales y para los tratamientos de restauración y protésicos en diversas áreas de la odontología.


En el desarrollo de Arti-Bite, Bausch se centró en la facilidad de uso, conseguida gracias a la alta calidad de las materias primas.

Cinco propiedades destacadas reflejan las principales ventajas de Arti-Bite:

- representación detallada y fiel de los contactos oclusales
- tiempo de fraguado corto de 30 segundos
- menos de un 0,1% de contracción y estabilidad dimensional
- gracias a su grado de dureza de 92 Shore A, Arti-Bite puede ser fácilmente procesado en el laboratorio dental
- viscosidad equilibrada para que el material sea fácil de manipular

Arti-Bite es un producto de alta calidad que no solo consigue resultados precisos, sino que también facilita el trabajo diario.

- Datos técnicos:
- Color: azul oscuro
- Relación de mezcla 1:1
- Tiempo de fraguado en la boca: 30 s
- Variación dimensional después de 24 h: $\leq -0,4\%$

Cartuchos con puntas de mezcla |  |
Cartuchos para utilizar en pistolas de mezcla estándar, proporción de mezcla 1:1



Bausch Fleximeter® Strips
REF: BK 252

15 Fleximeter®-Strips
2.8 mm - blau

Dr. Josef Bausch GmbH & Co. KG
Dulken-Schmidler-Str. 4 • D-59169 Kalle
Bausch Artificulating Papers, Inc. • 12 Murphy Drive, Unit 4
Wauson, WI 53092 U.S.A.
Bausch Artificulating Papers (Australia) Pty Ltd
© P.O. Box 9723 • Sydney NSW 2001 • Australia
Bausch Artificulating Papers Japan K. K.
Ind. Finc. 7-3-7, Sakai, Nishiku, Osaka Japan 543-0825



Made in Germany
Medical Product - For laboratory use only | Hochpräzision - Nur für Fachpersonal

















Fleximeter®-Strips de Bausch

En 1980 se incorporó Fleximeter® a nuestra gama de productos como instrumento sencillo de silicona. El desarrollo posterior hasta el producto actual Fleximeter®-Strips tuvo lugar en 2002.

Bausch Fleximeter®-Strips



				REF
	1,0 mm	15 x		BK 250
	1,5 mm	15 x		BK 251
	2,0 mm	15 x		BK 252
1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm	3 x 5 = 15		  	BK 253
1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm	3 x 1 = 3		  	BK 254



= recomendado para uso en el consultorio



= recomendado para uso en el laboratorio

Bausch Fleximeter®-Strips



Bausch Fleximeter®-Strips

Fleximeter® Strips son calibres flexibles de silicona esterilizable en tres grosores diferentes para determinar las distancias de preparación para las restauraciones.

Para crear un registro de mordida con una elevación controlada de la misma, por ejemplo, en casos de fuerte abrasión o férulas de descarga, Fleximeter® Strips pueden utilizarse en los grosores de 1,0 mm, 1,5 mm y 2,0 mm.

Para comprobar las distancias de preparación, Fleximeter® Strips pueden utilizarse con una aplicación de color de Arti-Spot® o Arti-Spray®. Las distancias de preparación insuficientes se detectan como una marca de color.

Calibres de silicona |  |  |

Para comprobar las distancias de preparación










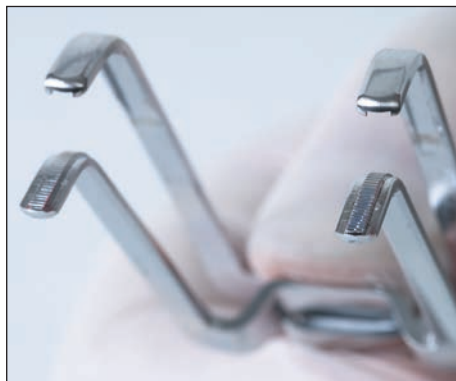


Instrumentos y accesorios Bausch

Las pinzas de mordida y las pinzas perfectamente diseñadas facilitan el uso cómodo de nuestros materiales para el registro de la oclusión.

También ofrecemos instrumentos de alta calidad como pinzas de mordida para el control bilateral de la oclusión o para uso interproximal.

Pinzas Bausch para papel de articular y Arti-Fol®

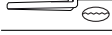


				REF
		1 x		BK 132
		1 x		BK 133
		1 x		BK 142
		1 x		BK 144
		1 x		BK 145



= recomendado para uso en el consultorio

Pinzas Bausch para papel de articular y Arti-Fol®

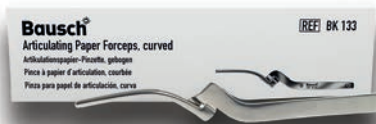

Pinzas Bausch para papel de articular y Arti-Fol®

Pinza Arti-Fol® BK 132 | 

Para una sujeción segura de nuestros papeles y folios de articular y oclusión, recomendamos la pinza Arti-Fol® BK 132 con ranura longitudinal.

Pinza para papel de articular tipo “Miller” BK 142 | 

La pinza para papel de articular “tipo Miller” es un instrumento de alta calidad para sujetar diferentes tipos de papel de articular.

Pinza Arti-Fol® “SteriSlide” BK 144 | 

La pinza Arti-Fol® “SteriSlide” de Bausch posee una ranura longitudinal para la sujeción óptima de los folios. Además, esta pinza incorpora una corredera (facilita la esterilización) con la que se puede abrir la pinza en una posición que permite la esterilización sencilla y eficiente.


Pinza Arti-Fol® para contactos interproximales BK 145 | 









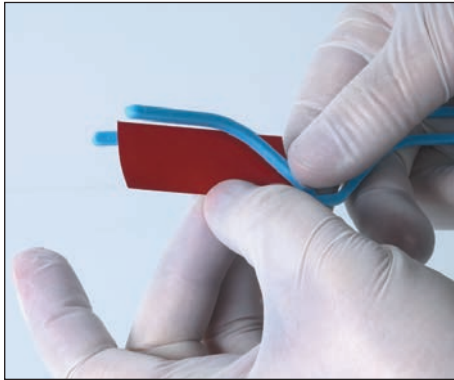






La pinza Arti-Fol® según el Dr. Müller se utiliza para el ajuste interproximal rápido y específico de las restauraciones. Su innovador y práctico diseño permite un manejo significativamente mejor en comparación con los métodos de comprobación convencionales. La elevada fuerza de sujeción de la pinza sostiene la lámina oclusal por dos

lados y garantiza una colocación segura durante la corrección del contacto por parte del odontólogo. El folio se puede sujetar de forma rápida y fácil. El instrumento no contiene cavidades y puede desinfectarse o esterilizarse fácilmente con todos los métodos conocidos.

También ofrecemos Arti-Fol® metallic de 12 µm en una anchura de 8 mm para combinar con la pinza. Arti-Fol® metallic es ideal para comprobar los contactos interproximales en puentes o coronas debido a su alta resistencia a la tracción, su coloración claramente visible y el bajo grosor del material.

Pinza de mordida Bausch | Accesorios



				REF
		1 x		BK 130
		1 x		BK 133
		1 x		BK 140
		5 x		BK 143
				REF
		1 x		BK 137
		1 x		BK 139
		20 x		BK 146




= recomendado para uso en el consultorio




= recomendado para uso en el laboratorio


Pinza de mordida Bausch | Accesorios

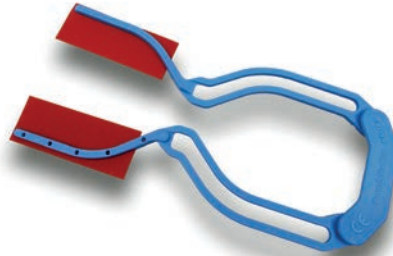

Pinza de mordida Bausch

Horquilla de mordida flexible BK 130 (+ 2x BK 133) |  | Nuestra horquilla de mordida flexible es una combinación de dos pinzas curvas BK 133 y un mango de goma BK 130. Las pinzas se insertan simplemente en el mango de goma y se pueden desplazar en el mismo.

Pinza de mordida Fix-Clip® BK 143 |  | La pinza de mordida Fix-Clip® es una alternativa a los instrumentos metálicos utilizados para fijar papeles de articular finos y folios de registro de la oclusión. Su mango elástico se puede esterilizar.

Soporte en Y Bausch BK 140 |  | Soporte en Y Bausch para folios de 75 mm de ancho o sedas de 80 mm de ancho. Este soporte está diseñado de manera que se puede utilizar en el articulador.

Accesorios

Las fundas de silicona Arti-Grip™ BK 146 se deslizan sobre cada garra individual de la pinza para mejorar la sujeción, especialmente con folios finos, en toda la longitud de la pinza.

Para nuestras sedas y folios anchos ofrecemos el dispensador acrílico BK 137.

Para los papeles y folios de 22 mm de ancho disponemos de un dispensador de plástico, con el número de pedido BK 139. Este dispensador posee un borde metálico de rasgado.



Bausch
WE MAKE OCCLUSION VISIBLE



Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG
Oskar-Schindler-Straße 4
D-50769 Köln - Germany
Tel: +49-221-70936-0
Fax: +49-221-70936-66
info@bauschdental.de
www.bauschdental.de

Bausch Articulating Papers, Inc.
12 Murphy Drive, Unit 4
Nashua, NH 03062, U.S.A.
Tel: +1-603-883-2155
Tel: 888-6-BAUSCH
Fax: +1-603-883-0606
info@bauschdental.com
www.bauschdental.com

Bausch Articulating Papers (Australasia) Pty, Ltd
ABN 73093760402
G.P.O. Box 3733, Sydney NSW 2001, Australia
Tel: +61-2-9345-1945
Fax: +61-2-9345-1955
info@bauschdental.com.au
www.bauschdental.com.au

www.bauschdental.com

Bausch Articulating Papers Japan K. K.
2nd Floor, 1-4-2, Jonan, Ikedashi
Osaka 563-0025, Japan
Tel: +81 72-737-9501
Fax: +81 72-737-9502
info@bauschdental.jp
www.bauschdental.jp

Bausch Importação de Materiais Odontológicos Ltda.
Rua Paulo Eduardo Xavier de Toledo, 379 salas 8 e 9
13304-240 Itu-SP, Brasil
Tel: +55 11 3020-9263
vendas@bauschbrasil.com.br
www.bauschbrasil.com.br

Bausch Articulating Papers Co., Ltd.
#1004, The O Ville B/D
344, Jong-Ro, Jongno-Gu
Seoul 03114, Korea
info@bauschdental.kr
www.bauschdental.kr

