

TORNIQUETE ANFIBIO

Características de la segunda generación

- Usable, resistente, ligero y compacto
- Diseñado para utilizarse en el agua salada o para requisitos marinos
- Sistema de bloqueo automático y antideslizante
- Correa que se puede morder para ayudar a los usos con una sola mano
- Instrucciones de uso en la parte de afuera
- Espacio para anotar el momento en el que se aplicó el torniquete
- Trinquete de acero inoxidable revestido POR COMPLETO en polvo
- Carga máxima de trinquete 250 kg
- Diseñado para el entrenamiento repetitivo con poco desgaste

Leyenda de símbolos del dispositivo médico

SÍMBOLO

DESCRIPCIÓN



FABRICANTE: Indica el fabricante del dispositivo médico.



PRECAUCIÓN: Indica la necesidad de que el usuario consulte las instrucciones de uso para obtener información respecto a medidas de precaución importante, como advertencias y precauciones que, por diversas razones, no pueden presentarse en el propio dispositivo médico.



NO REUTILIZAR: Indica un dispositivo médico que solo se puede utilizar una vez o en un solo paciente durante un solo procedimiento.



Distintivo CE: Significa conformidad técnica europea



REPRESENTANTE EUROPEO

AUTORIZADO: Los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relacionados con la comercialización de productos; Directiva de dispositivos médicos.



CÓDIGO DE LOTE: Indica el código de lote del fabricante para poder identificar el lote o el código.



Mantenimiento preventivo:

- Enjuague con agua dulce después de cada uso o exposición al agua salada.
- Inspección y pruebas de componentes deben realizarse regularmente
- La familiarización debe realizarse regularmente y antes de la aplicación real para reducir los efectos del estrés.

Contraindicaciones:

- No usar para sangrado menor
- No aplicar sobre una articulación
- No aplicar sobre artículos en bolsillos



Para registrar su torniquete y validar su garantía, ingrese a www.omnainc.com/pages/contact

Fabricado para:

Manufacturer Symbol

OMNA Inc.

1400 63rd Ave S

St. Petersburg, FL, 33705, USA

Phone: +1 727.222.6429 Email: sales@omnainc.com

Patentes: www.omnainc.com


EC	REP	Patrocinador Australiano
EMERGO EUROPE Prinsessgracht 20 The Hague, 2514 AP, The Netherlands		EMERGO AUSTRALIA Level 20, Tower II Darling Park, 201 Sussex St Sydney, NSW, 2000, AU

Hemorragia GRAVE en el Brazo o la Pierna:

aplique el torniquete OMNA

Uso Con Dos Manos

1. **TIRAR** - sacar la correa que está guardada
2. **Posición Alta y Prieta - RODEAR** la extremidad
3. **Colocar la correa mediante anillo rojo**
4. **TIRAR Hacia Abajo Apretado** - que quede prieto
5. **LEVANTAR** la palanca del trinquete hasta que se detenga la hemorragia y se elimine el pulso distal

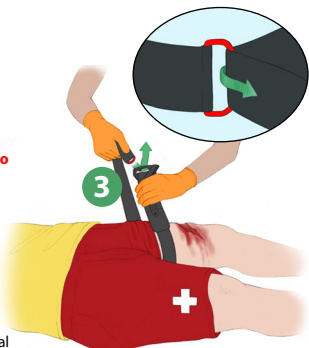

Uso Con Una Mano

1. **Posición Alta y Prieta.**
El torniquete también se puede aplicar 5 - 8 cm por encima de la herida



2. **Morder - correa que se puede morder. TIRAR Hacia Abajo Apretado** - que quede prieto



3. **Velcro**



4. **Asegurarse de que quede prieto; Volver apretar según sea necesario**



5. **LEVANTAR** la palanca del trinquete hasta que la hemorragia se detenga y que no se pueda sentir el pulso debajo del torniquete. Si no se puede controlar la hemorragia o si hay pulso distal, comprima más o aplique otro torniquete por encima o al lado del primero

6. **Anote el momento en el que se aplicó el torniquete. Busque atención médica**

