




Gerontechnology Product
Catalog

樂齡科技產品目錄

2024

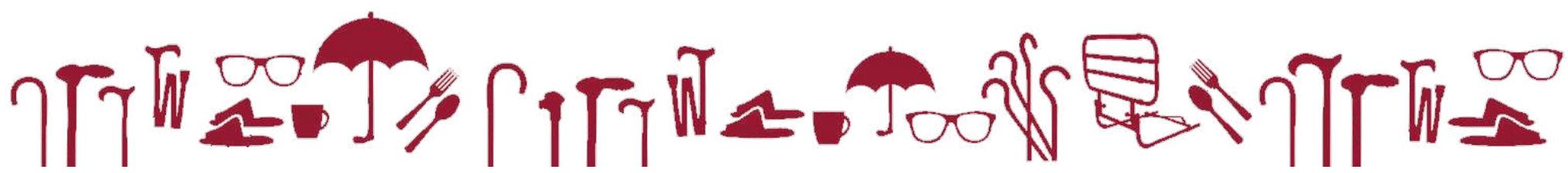

| | |
|---|----|
| 1. Hospital bed and accessories (醫療護理床及附屬用品) | 3 |
| 2. Chair for special purpose (特別用途坐椅) | 9 |
| 3. Special feeding equipment (特別餵食用具) | 10 |
| 4. Communication aid equipment (溝通輔助設備) | 11 |
| 5. Bed monitoring system (病人床邊監察系統) | 14 |
| 6. Visual cues device for gait training (步態訓練用的視 覺提示裝置) | 16 |
| 7. Companion robot (陪伴機械人) | 17 |
| 8. Equipment and accessories for multi-sensory therapy (多感治療設備及相關用品)..... | 18 |



好好集團有限公司 HOHO GROUP LIMITED
 荃灣德士古道220-248號荃灣工業中心612室
 ☎ (852) 3568 5193 📠 (852) 3007 5193 📞 (852) 6062 5332
 ✉ info@hoholife.com.hk 🌐 <http://www.hoholife.com>



德國Tekvor五功能超低床

TK-EP-5-Low



電動五功能；
背部 0°—70°，腳部 0°—30°

水平升降220-660mm；



包括扶手架, 木質床欄,
及防火床墊(BS7177)



內尺寸 900*2000mm;
外尺寸 1020*2175mm;



背部
0-70°



腳部
0-30°



水平升降
440-865mm



前後傾斜
0-12°

*此產品屬「樂齡及康復創科應用基金」之參考清單中項目第1.2

德國Tekvor纖巧三功能床



電動三功能；

背部 0°—70°，腳部 0°—30°

水平升降 440-865mm；



包括扶手架, 木質床欄,
及防火床墊(BS7177)

內尺寸 780*1750mm;
外尺寸 900*1910mm;



*此產品屬「樂齡及康復創科應用基金」之參考清單中項目第1.2



直接放床架

用遙控輕鬆調整角度！



產品詳情

- 材質: 面料：聚酯纖維 (PET)100% 填充物：海綿 高科技木製板彈簧
- 尺寸: S (W970xL1950xH210mm, W3'2"xL6'4"xH8") M (W1220xL1950xH210mm, W4'xL6'4"xH8")
- 重量: S 約 28kg M 約 32kg
- 保養: 床褥 3年 遙控 1年
- 遙控器可自由安裝在床的左邊或右邊
- 毋需安裝、免費送貨
- 日本製原裝進口



*此產品屬「樂齡及康復創科應用基金」之參考清單中項目第1.4

台灣居家兩層式電動床褥

DD-90/DD-120



DEWERT OKIN
A Phoenix Mecano Company
台灣工藝 嚴選德國OKIN馬達



直接放床架或加腳座地

兩層式設計

上層床墊與下層隱藏式摩打分開，頭尾有支架固定上層床墊，上層床褥可自由選配厚度。



上層－雙面床墊

一面軟一面硬，兩種舒適度。

下層－隱藏式摩打

下層為隱藏式摩打，完全平躺時不會看見摩打部分。

座地床腳

床褥可加購座地床腳(20cm)直接座地使用



產品詳情

- 德國靜音OKIN摩打
- 頭部可提升至85度，腳部35度
- 尺寸: 3呎x6呎(90cmx183cm), 4呎x6呎(122cmx183cm)
- 高度: 下層床架14cm，上層床墊10cm
- 支架及摩打保養三年，遙控器一年
- 台灣製造



*此產品屬「樂齡及康復創科應用基金」之參考清單中項目第1.4

纖巧型電動床褥 (2尺半)

KD-202B



加床腳直接
座地

直接放床架或加腳座地



背部上升



腳部上升



背腳連動

品質認證



產品詳情

- 材質: 面布: 天絲, 乳膠 3cm, 極冷膠 2cm
- 尺寸: 2呎半x6呎x9吋(75cmx183cmx23cm)
- 頭部可提升至85度, 腳部50度
- 20cm黑色圓型床腳 (可選裝, 另購)
- 原裝床欄 (可選裝, 另購)
- 重量: 60kg

*此產品屬「樂齡及康復創科應用基金」之參考清單中項目第1.4

德國 M2 站立電動護理床



MECP



Functional Sequence



1. Lying position



2. Head and foot part adjustment



3. Turn of the LS by 45°



4. Turn of the LS by 90°

產品詳情

- 一鍵操作，連續平穩由平躺至站立
- 床高可調 40 - 80cm
- 可選左側或右側落床，慳位設計
- 外框尺寸：W1000xD2100



5. Sitting position



6. Rising position

*此產品屬「樂齡及康復創科應用基金」之參考清單中項目第1.5

SB3t

可傾斜沐浴便車



showerbuddy®


SB-SB3t

Showerbuddy SB3t 可傾斜沐浴便車，為無障礙淋浴提供更佳體驗。

它可以直接移動至大部分座廁上使用，或進入淋浴間，減少照顧者手動扶抱及轉移，亦可用作流動座廁便車。此外，特別的傾斜功能減低了用家在洗澡時的壓力，提高舒適度和幸福感。



這款 Showerbuddy SB3t 可傾斜沐浴便車，不但輕便、耐用，而且操作簡單，是用家洗澡的不二之選。

所有 Showerbuddy 的產品，都具有相同的安全性和達到耐腐蝕材料標準。

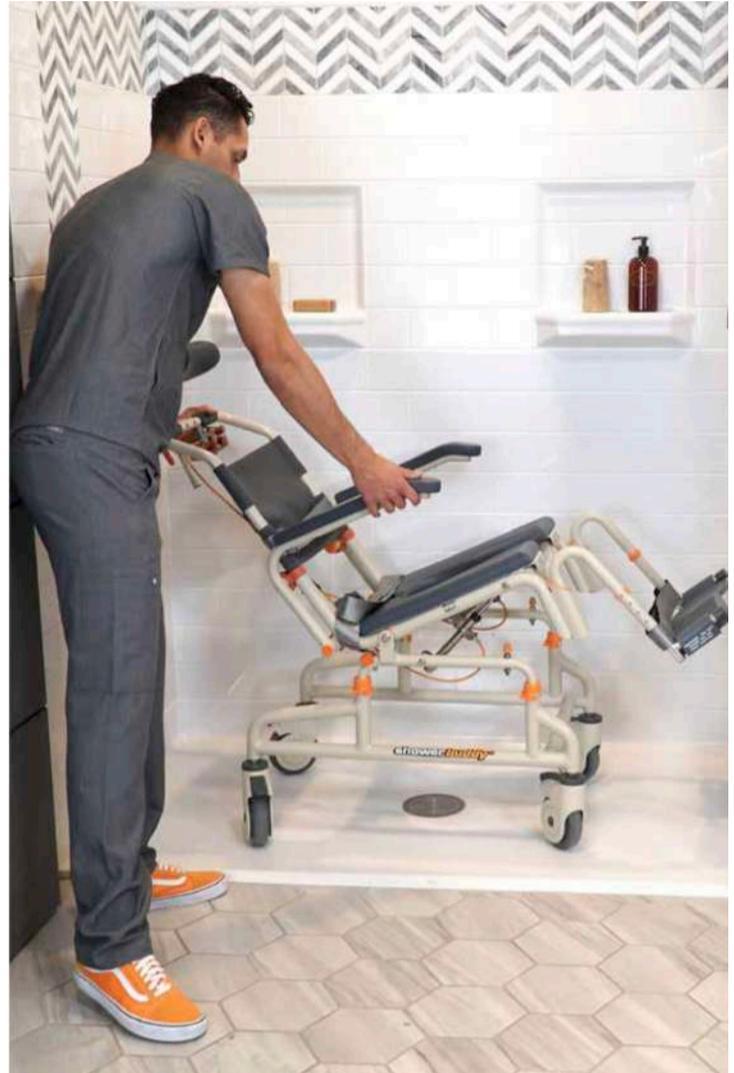

產品背面

產品側面

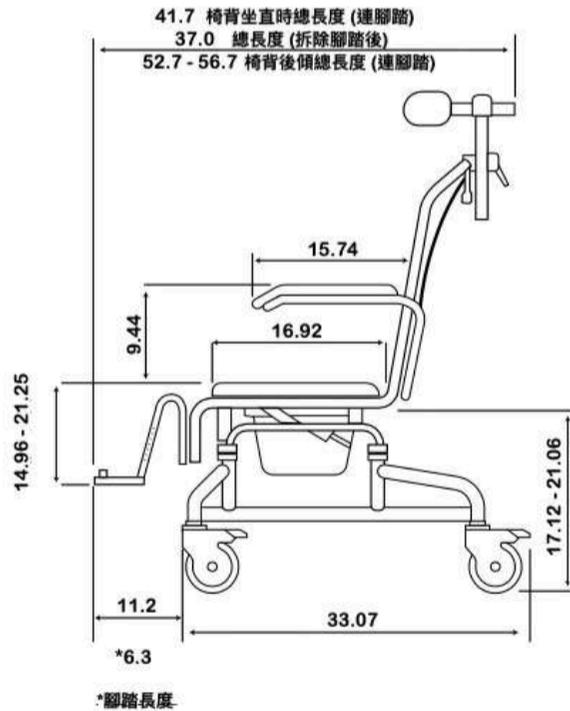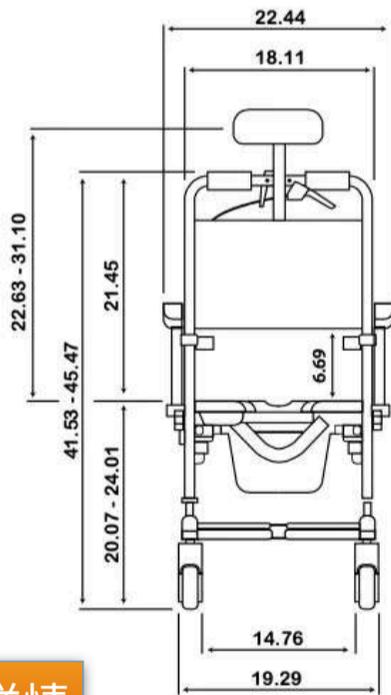

SB3t

可傾斜沐浴便車



座椅背部向後傾斜
0-30度

長度單位：英吋

產品詳情

- 承重：250kg
- 傾斜角度：0-30度 (無間斷)
- 適用於大部分標準座廁上
- 簡單設計，免除日常複雜維護
- 座高可自行調節
- 可用作流動座廁便車
- 免工具組裝
- 頸托：可自由調節，提高舒適度
- 扶手：可拆卸 / 可鎖定 / 可向上翻後
- 腳踏：可拆卸 或 可轉移到旁邊，高度亦可調節
- 安全帶：腰帶、胸帶，以及小腿帶
- 車輪：125mm x 4，靈活360度旋轉，亦可個別鎖定
- 不銹鋁質框架 (6061 T6 級別)
- 不銹鋼零件及配件 (304 級別)



*此產品屬「樂齡及康復創科應用基金」之參考清單中項目第2.1



GYENNO **Bravo Twist** 睿餐智能防抖匙

讓人們獨立進食，使他們重拾生活樂趣

GYENNO **Bravo Twist** 適用於手震範圍在2.7寸(7cm)內的人



防手震




360度轉動

2.7inch



包裝內包括:

- 湯匙手柄*1
- 外盒*1
- 湯匙配件*1
- 叉子配件*1
- 充電線*1
- 手帶*1

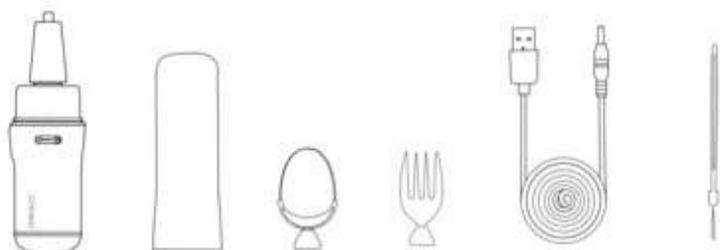


*此產品屬「樂齡及康復創科應用基金」之參考清單中項目第8.2

Incus Kite 2 藍牙助聽耳機

INCUS

IC-Kite2

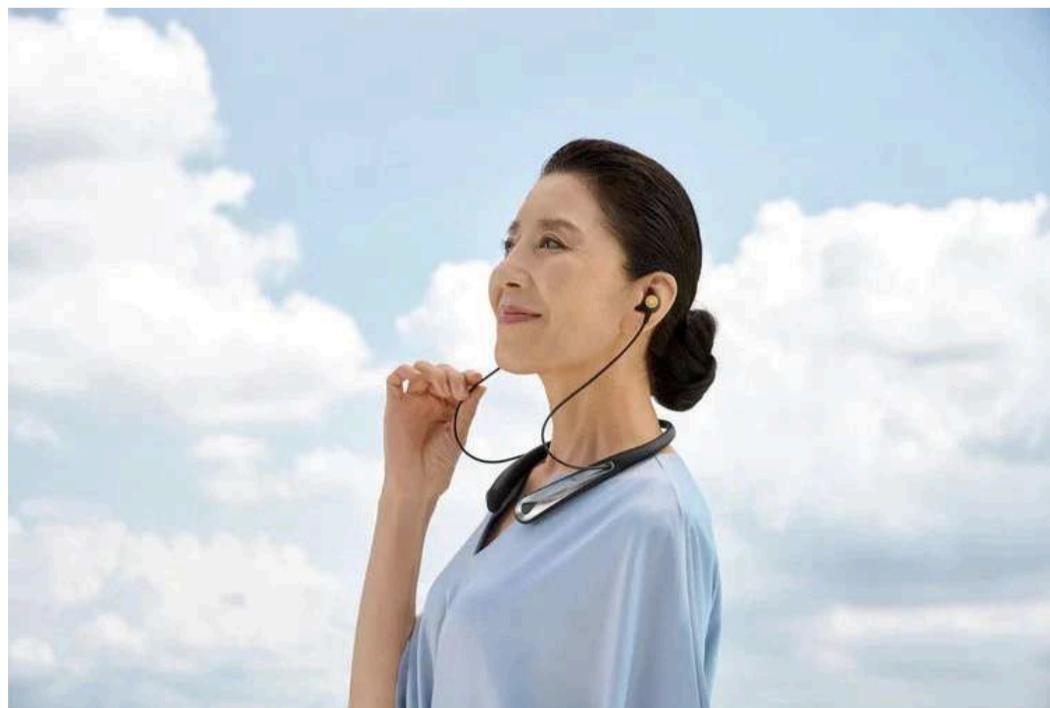

智能降噪

APP
聽力測試

藍牙切換

產品詳情

- **兩種指向性模式：**根據您的喜好切換不同模式，獲得最佳聆聽體驗。
- **簡單又快速的設定：**支援 iOS及Android 系統，在app中只需5分鐘即可完成聽力測試和裝置設定，為你度身定造專用的聆聽體驗。
- **藍牙耳機模式：**從智能手機無線傳輸到Kite 2。
- **充電式設計：**內置鋰離子電池，電池使用時間長達12小時
- **卓越音質：**香港科技大學專利的智能降噪技術，提高人聲和降低背景噪聲。雙咪高峰陣列與骨傳導麥克風協同工作，定位您想要佩戴的聲音，並提供回音消除。
- **快速簡易設置：**通過 app，設置 Kite 2輔聽耳機，可優化輔聽細節，並獲取高級功能。



*此產品屬「樂齡及康復創科應用基金」之參考清單中項目第11.3



超輕巧

重量僅12.2克，超輕量設計，如同配戴iPod Nano一樣時尚，看起來年輕不顯老。



情境模式

內建兩組最適情境模式，模式1著重於人聲的展現，清晰高品質的聲音讓您的社交互動更加順暢自在；當您希望享有清柔的環境氛圍，可選擇模式2提升聆聽品質。



模式 1

人聲模式

強調高頻音的呈現，降低噪音干擾，讓您更清晰完整接收對話或是電視節目內容。




模式 2

放鬆模式

同時放大高頻音與低頻音的比例，您可自然地聆聽環境中和諧的原聲。

簡單易用

極簡介面，容易操作，可調較音量及模式。

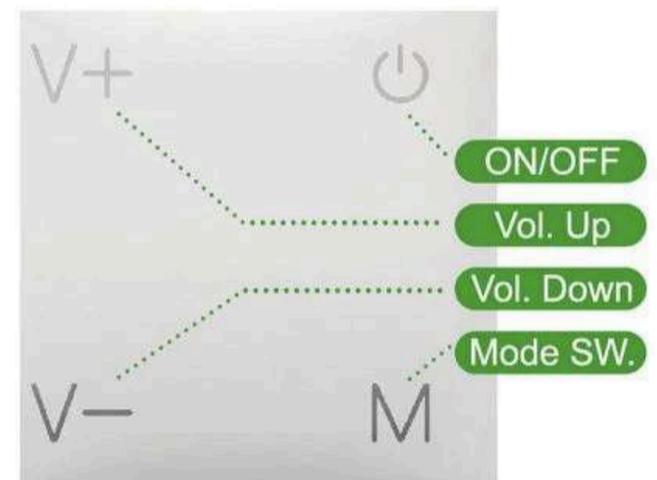

| | |
|------|---------------------------------|
| 產品型號 | ME-200P |
| 尺寸 | 32.5 (長) x 36 (寬) x 14.4 (高) mm |
| 重量 | 12.2 克 |
| 最大輸出 | 115 +/- 4 dB SPL @ 2,900 Hz |
| 最大增益 | 60 +/- 5 dB |
| 充電時間 | 充 1 小時可用 20 小時 |
| 認證 | CE, RoHS |



*此產品屬「樂齡及康復創科應用基金」之參考清單中項目第11.3



簡單易用及具備強大聽力輔助功能的藍牙助聽耳機

behear.smarto 袋裝式聽力輔助耳機

BeHear® SMARTO 能簡單有效地提高日常對話溝通能力從而改善生活質素。使用者能按個人聽力需要作即時設定。SMARTO 適合中度至比較嚴重聽力需要使用，不但能幫助日常與別人對話，同時也能透過藍牙接收手機或移動裝置的音訊。

- 無需設定、即時使用
- 加大按鍵設計、操作簡易
- 聲源定位功能
- 自設一鍵緊急撥號功能
- 能有效提升來電通話質量
- 內建耳鳴遮蔽治療程序
- 把音原提升至更清晰完美



| | |
|--------------|---|
| | smarto 全新產品 |
| 功能 | 袋裝式聽力輔助耳機 |
| BeHear® 手機軟件 | 支援 |
| 藍芽規格 | BT 5.0 Class II EDR + BLE 支援雙藍芽同時連接 |
| 電量使用 | 待機:>1000小時 聽力輔助:>48小時 音頻輸出:>40小時 充電時間:~2小時 |
| 軟件功能 | 自助聽力測試 即時個人化調音 |
| 特殊功能 | 簡易充電座 EasyListen™ 減慢來電速度 最大聲音增益 +70dB 簡易設置啟動 內置頭戴式及入耳式耳機供選擇 |
| 產品淨重 | 75g |

*此產品屬「樂齡及康復創科應用基金」之參考清單中項目第11.3




可摺式電動移位站立機 Electric Patient Hoist and Raiser

BY-PL-13



The Patient Lift is mainly designed to assist caregivers in hospitals, nursing homes, long-term care centers, and private residences. This product is used to lift patients with limited mobility in order to provide the following functional purposes:

- Patient Lift Move patient horizontally back and forth between adjacent locations (eg, chair, wheelchair, bed, bathroom, toilet) to desired location.
- Assisting caregivers to assist patients in actions such as going to the toilet.
- Assist patients in rehabilitation training.

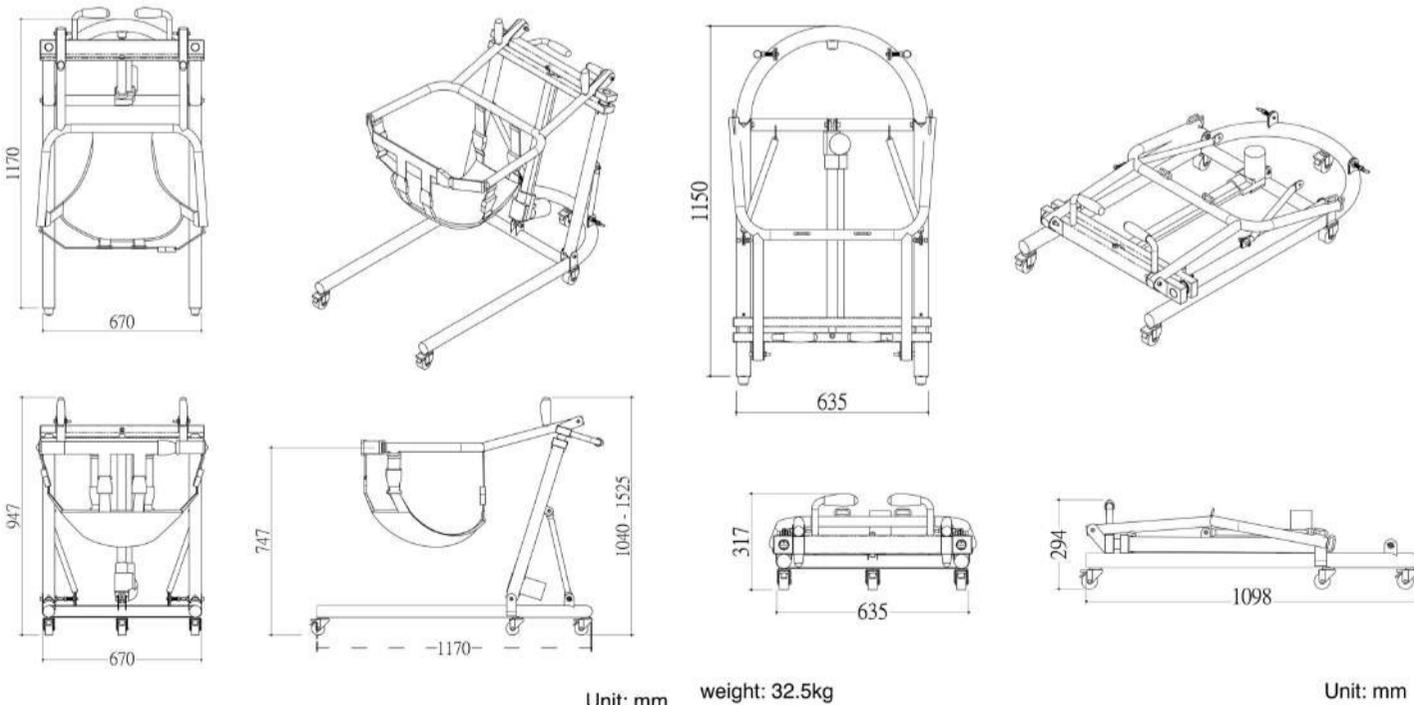

Unit: mm weight: 32.5kg

Unit: mm

- **Material:** Steel pipe 2.0 – 2.5 mm
- **Weight:** 32.5 Kg
- **Weight Capacity:** 165kg (363 lb)
- **Lifting Range:** 104cm – 153cm (40" – 61")
- **Country of origin:** Taiwan



*此產品屬「樂齡及康復創科應用基金」之參考清單中項目第12.4

香港荃灣德士古道220-248號荃灣工業中心612室

37099320 info@hoholife.com.hk www.hoholife.com



HOHOLIFE

好好生活

GUARDMAN® 離床警報套裝

GUARDMAN®防跌感應床墊套裝是一套DIY裝置，如長者不慎在離座時跌倒，可為護理人員或家庭成員提供即時警報信號。

套裝包括:

- 無線監測警示器
- 感應床墊
- 護士呼叫按鈕
- 便攜式接收器



無線監測警示器(GWT-L300)

- 無線監測警示器可將無線信號傳輸到接收器，並在長者離開床時觸發警報響聲和閃燈
- 亦可以透過按下護士呼叫按鈕，擴展為無線緊急呼叫系統 • 防水濺設計
- 配有用於控制每個功能的獨立按鈕包括電源開關，傳輸，燈光，聲音提示

感應床墊 (GAA-BP100)

- 易於使用，無需設置和安裝電池
- 防滑材質和不會引起皮膚敏感
- 尺寸: 30"x 20"
- 感應墊備有3種操作模式 – 地墊模式/護墊 模式/ + 3秒延遲
 1. 地墊模式：壓力打開時觸發警報（有人踩到墊子上）
 2. 護墊模式：無壓力時觸發報警（離開感應墊）
 3. 3秒延遲：無壓力時觸發報警，但延遲3秒以減少誤報



護士呼叫按鈕(GAA-UNCB1)

- 只需接駁無線監測警示器即可成為呼叫按鈕

便攜式接收器 (GWR-L25)

- 能夠配對多達4個不同的感應器
- SUB-1G射頻頻率，無線傳輸距離可達300米/1,000英尺（直線距離）
- 備有3種可選擇的操作模式：聲音/振動/聲音和振動
- 內置皮帶夾



*此產品屬「樂齡及康復創科應用基金」之參考清單中項目第14.2



SKYWALK™

Powered by APOLLO&PROMETHEUS



Automatic recognition, intervention & evaluation system of Freezing Of Gait (FOG)

步態凍結輔助系統

SKYWALK™

Powered by APOLLO&PROMETHEUS

Automatic recognition
intervention & evaluation system of FOG

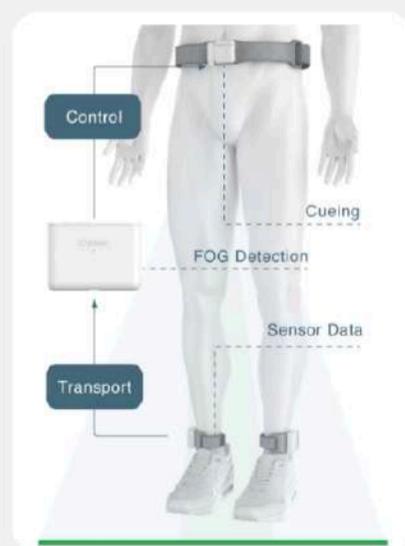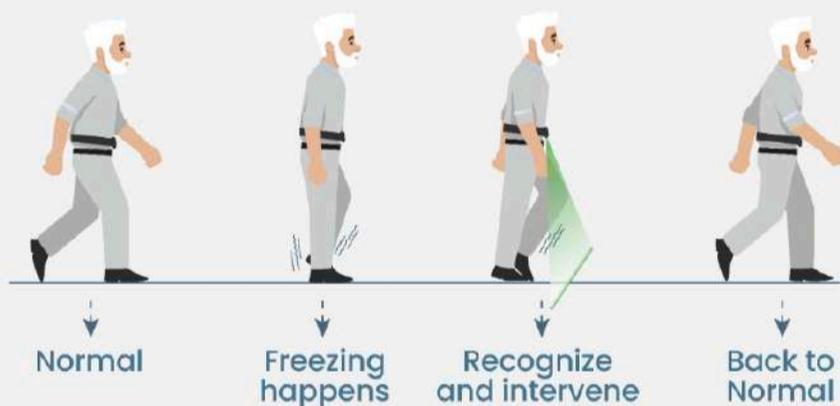

Real-time monitoring of gait through wearable sensors

The SKYWALK will automatically recognize and provide visual or auditory intervention to assist patients in relieving from FOG once it happens.

The intervention will disappear automatically when the patient returns to normal walking

No Interventions during normal walking

*此產品屬「樂齡及康復創科應用基金」之參考清單中項目第18.18



Doll Therapy 娃娃治療

日本Cry-Laugh Tartan 哭笑BB仔



內置感應器：撫摸小手時會哭，
撫摸小腳時會笑，
輕拍小肚時會安靜下來。

仿初生嬰兒設計：體重約1320g，
身高約47cm。

平躺時眼睛會閉合睡覺，手脚關節可動。
附有嬰兒衣服、帽子、床、枕頭和被子。



(為你的哭笑BB仔縫製屬於他/她的衣服吧)

『呼喚"愛"的情感，
助失智症長者享受愉快的每一天。』



● 使用2粒1.5V鹼性電池



長者愉快地迎接家中新成員



〈哭笑BB設計師〉



日本康樂治療協會主席：芹澤隆子女士



產品詳情

BB身長：約47cm

重量：1.4kg

材質：BB/軟塑料，布/聚酯

配件：嬰兒床，枕頭，毯子

電池：AA電池x3



*此產品屬「樂齡及康復創科應用基金」之參考清單中項目第19.3

Soundbeam 動感音樂體驗



這個源自英國的獲獎發明，以音樂帶出快樂及健康，適合任何人士，特別是長者及有情緒需要支援人士。用家可透過輕觸傳感器、甚或只需身體或手腳輕鬆舞動等簡單動作操控光束傳感器；可單獨或多人同時使用，透過獨特電子科技技術，使用者不用學習，便可輕易操控不同樂器，自由隨著音樂互動，產生不同變化，創作出獨一無二的樂章。

Soundbeam 有3個主要組件：

1. 控制器 (Controller)，就像一台電腦。在這控制器，所有音樂都被編程並存儲為聲音集 (Soundsets) 內，裡面包括不同旋律、樂器聲音，如鋼琴，吉他，小提琴，鼓，色士風，長笛，西塔琴，二胡，大自然和動物的聲音、人聲等)；內置的音樂技術程式會使用家感覺自己置身於樂隊般一樣輕易及和諧地演奏。控制器可以存儲數百個聲音集；您將獲得41種預先錄製的樂曲。要搜索您喜歡的歌曲，只需在觸屏上瀏覽，並按其圖標即可選擇歌曲，操作簡單，非常人性化。

2. 光束傳感器 (The Sensor Beam)，會單向發出超聲波。當您在前面或附近晃動並切入光束路徑時，它便會將您的舞動變成音樂！每台控制器最多可接駁4個光束傳感器。可以將傳感器放在米高風支架或手持式設備上，並指向任何方向，以收集使用者的舞動動作。

以下視頻將向您展示不同能力的人在不同情況下，如何以不同的方式使用這個光束傳感器：

i 夏洛特 (Charlotte) 在一場騎馬事故中嚴重殘疾，她只要搖著頭，便可操控大提琴演奏巴赫 (<https://youtu.be/CmcqudQG5cc>)

ii 珍妮特 (Janet)，祖母兼公司的頭目，她在首次使用Soundbeam時隨著背景音樂跳舞並隨興創作 (https://youtu.be/_kq8--UFOCM)

iii 現年80歲的露西 (Lucy) 居住在養老院中，曾5次中風並患有早期腦退化症，很高興地參與Soundbeam的音樂治療 (<https://youtu.be/22czeieLKxl>)

iv Keat Hong 社區中心的長者們和他們的家人及朋友一起透過Soundbeam做了新加坡第一個共融的倒數音樂會 (<https://youtu.be/5IWZ0C5Eo1s>)



無線輕觸傳感器



3. 無線輕觸傳感器 (Wireless Switch)，點擊時可播放自選設定的樂器聲音。它可以放在桌子或地板上，也可以用手握住，以便您在演奏時可以搖擺和跳舞。您可以只使用一個，或同時使用多個無線輕觸傳感器，例如整套鼓樂團的樂器。它們由電池供電。每台控制器最多可接駁8個無線輕觸傳感器。

Soundbeam 非常便攜，它可以裝在中型行李箱中，也可以放在手推車上移動。它只需要簡單配件，例如高質量的揚聲器和米高風支架。無需任何音樂背景，不受年齡、語言、種族、能力或殘疾的限制；即插即用，任何人都可以像專業人士一樣製作音樂。

產品簡介: <https://youtu.be/wVsIRQNrdC8>

個案分享: <https://youtu.be/jtL0bSY7aUI>



*此產品屬「樂齡及康復創科應用基金」之參考清單中項目第19.4

