



eastsidemed®



eastsidemed®
es Nebulizer



MN100ZH

es メッシュネブライザ MN100ZH

軽くてコンパクトで持ち運びに便利なメッシュ式ネブライザ
軽量、コンパクトで高性能、スタイリッシュなデザイン

薬液ボトル

- ・ 本体上部の薬液ボトルは薬液を入れるのがとても簡単。パッキンがついていて薬液が漏れません。
- ・ 薬液ボトルとメッシュが一体化されているため、洗浄・組み立てが簡単です。
- ・ 薬液がメッシュに接触している限り、さまざまな角度で吸入可能です。

豊富なアクセサリ

- ・ マウスピースの他、ラージ/スモールの2種類のマスクが付属します。

電源

- ・ 単3形アルカリ乾電池、付属の専用ACアダプタどちらでもご使用いただけます。

安心の材質

- ・ BPA FREE / LATEX FREE / DEHP FREE


噴霧粒子径	約 5 μ m
噴霧能力	0.2 mL/分以上 (0.9% 生理食塩水噴霧時)
最低霧化可能薬量	0.5 mL
薬液ボトル容量	最大 8 mL
本体サイズ	幅 41.5 mm x 奥行 45 mm x 高さ 93 mm
本体重量	85 g (電池除く)
使用環境	温度: 5°C ~ 40°C, 湿度: 15% ~ 93% RH
電源	専用 AC アダプタ: AC100-240V 50/60Hz 電池: 単3形アルカリ乾電池 2本
付属品	マウスピース、マスク(ラージ、スモール)、マスク用コネクタ、キャップ、 専用 AC アダプタ、ポーチ、添付文書、取扱説明書、保証書

コード No.	価格
ES-MN100ZH	¥17,000 (税込 ¥18,700)

医療機器届出番号 13B2X00231001030 クラス I (一般医療機器)



マスク ラージ/スモール

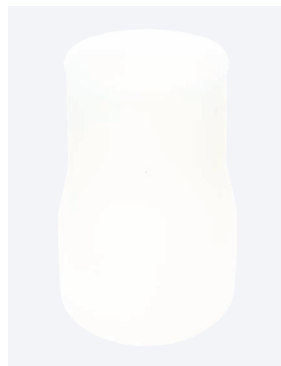

マウスピース



ポーチ

**BPA
FREE**

**LATEX
FREE**

**DEHP
FREE**



esメッシュネブライザ
MN100ZH

CN160NR

es コンプレッサーネブライザ CN160NR

両手に収まるコンパクトなコンプレッサー式ネブライザ

非常に静かな動作音で、気になる夜の使用も安心

ネブライザキット

・調整つまみを回すことによって噴霧量を約0.08～0.2 mL/分まで調整可能です。

噴霧粒子径(MMAD)

・2.6 μ m以下の粒子径は、より効率的で効果的なトリートメントを可能にします。

豊富なアクセサリ

・マウスピースの他、ラージ/スモールの2種類のマスクが付属します。

電源

・付属の専用ACアダプタまたはオプションの専用カーチャージャーを使えば車中でもご使用いただけます。

安心の材質

・BPA FREE / LATEX FREE / DEHP FREE

噴霧粒子径	2.6 μ m以下
噴霧能力	約0.08～0.2 mL/分 (0.9%生理食塩水噴霧時)
適正薬液量	約2～5 mL
本体サイズ	幅 135 mm x 奥行 88 mm x 高さ 54 mm
本体重量	287 g (アクセサリ除く)
使用環境	温度: 10 $^{\circ}$ C～40 $^{\circ}$ C、湿度: \leq 90% RH
電源	専用ACアダプタ: AC100-240V 50/60Hz
付属品	ネブライザキット、マウスピース、マスク(ラージ、スモール)、エアフィルタ、エアチューブ、専用ACアダプタ、ポーチ、添付文書、取扱説明書、保証書

コードNo.	価格
ES-CN160NR	¥14,000 (税込¥15,400)

医療機器届出番号 13B2X00231000043 クラス I (←一般医療機器)



ネブライザキット NK001NR



マスク ラージ/スモール



ポーチ

**BPA
FREE**

**LATEX
FREE**

**DEHP
FREE**



esコンプレッサーネブライザ
CN160NR

CN160DG

es コンプレッサーネブライザ CN160DG

かわいいワンワンのコンプレッサー式ネブライザ

子どもたちを和ませるかわいいワンワンと一緒にトリートメント

ネブライザキット

・調整つまみを回すことによって噴霧量を約0.08～0.2 mL/分まで調整可能です。

噴霧粒子径(MMAD)

・2.6 μ m以下の粒子径は、より効率的で効果的なトリートメントを可能にします。

豊富なアクセサリ

・マウスピースの他、スモールマスクが付属します。

電源

・付属の専用ACアダプタまたはオプションの専用カーチャージャーを使えば車中でもご利用いただけます。

安心の材質

・BPA FREE / LATEX FREE / DEHP FREE

噴霧粒子径	2.6 μ m以下
噴霧能力	約0.08～0.2 mL/分 (0.9%生理食塩水噴霧時)
適正薬液量	約2～5 mL
本体サイズ	幅 216 mm x 奥行 135 mm x 高さ 93 mm
本体重量	334 g (アクセサリ除く)
使用環境	温度: 10℃～40℃、湿度: \leq 90% RH
電源	専用ACアダプタ: AC100-240V 50/60Hz
付属品	ネブライザキット、マウスピース、スモールマスク2個、エアフィルタ、エアチューブ、専用ACアダプタ、ポーチ、添付文書、取扱説明書、保証書

コードNo.	価格
ES-CN160DG	¥14,000 (税込¥15,400)

医療機器届出番号 13B2X00231000048 クラスI (←一般医療機器)



ネブライザキット NK001NR



マスク スモール



パッケージ



ポーチ

BPA
FREE

LATEX
FREE

DEHP
FREE



esコンプレッサーネブライザ
CN160DG

NK001NR

es ネブライザキット NK001NR

調整つまみ

- 調整つまみを回すことによって噴霧量を約 0.08 ~ 0.2 mL / 分まで調整可能です。

接続可能機種

- CN160NR
- CN160DG

安心の材質

- BPA FREE / LATEX FREE / DEHP FREE



噴霧粒子径	2.6 μ m 以下
噴霧能力	約 0.08 ~ 0.2 mL / 分 *
適正薬液量	約 2 ~ 5 mL

マウスピース付

* 0.9%生理食塩水噴霧時

コード No.	価格
ES-NK001NR	¥1,500 (税込 ¥1,650)



Close




0.08mL / 分

Open



0.2mL / 分

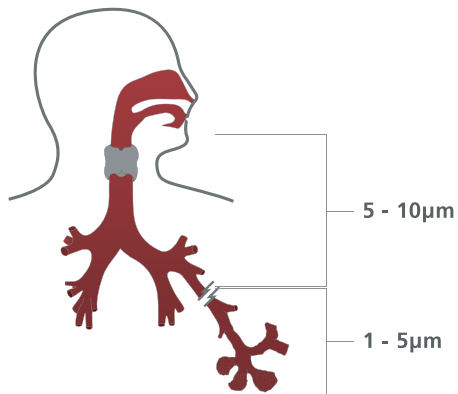

ネブライザキット NK001NR は、

- 安定して 2.6 μ m 以下の粒子径を噴霧することができ、また噴霧速度を約 0.08 ~ 0.2mL / 分に調整することができます。
- 独自構造の弁により、さまざまな患者の状態に合わせた異なる粘度の薬を使用することができます。
- 調整つまみを全開にした時は、高い粘性の薬液および高い呼吸能力を持つ使用者に適しており、調整つまみを閉じた時は、低い呼吸能力を有する子供や乳児に適しています。
- 慢性閉塞性肺疾患 (COPD) や喘息など呼吸系疾患に対して特に優れた性能を発揮します。

Accessories

es メッシュネブライザ MN100ZH用 交換パーツ



マウスピース

コードNo.	価格
ES-MP100ZH	¥1,000 (税込¥1,100)

2個入



ラージ



スモール

マスク

コードNo.	サイズ	価格
ES-ML100ZH	ラージ	¥1,100 (税込¥1,210)
ES-MS100ZH	スモール	



薬液ボトル

コードNo.	価格
ES-MC100ZH	¥6,000 (税込¥6,600)



ポーチ

コードNo.	価格
ES-PC100ZH	¥1,000 (税込¥1,100)



ACアダプター

コードNo.	価格
ES-AA3016	¥1,800 (税込¥1,980)

es コンプレッサーネブライザ CN160NR / CN160DG用 交換パーツ



ネブライザキット

コードNo.	価格
ES-NK001NR	¥1,500 (税込¥1,650)

マウスピース付



マスク

コードNo.	サイズ	価格
ES-ML003NR	ラージ	¥1,100 (税込¥1,210)
ES-MS004NR	スモール	



エアチューブ / エアフィルタ*

コードNo.	品名	価格
ES-AT005NR	エアチューブ	¥1,000 (税込¥1,100)
ES-AF007NR	エアフィルタ	

* 10 個入



マウスピース


コードNo.	価格
ES-MP021NR	¥1,000 (税込¥1,100)

2 個入




CN160NR用ポーチ

コードNo.	価格
ES-PC160NR	¥1,100 (税込¥1,210)

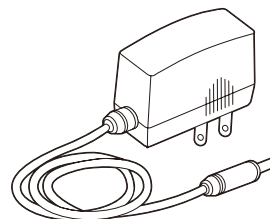

CN160NR / CN160DG用 ACアダプタ

コードNo.	価格
ES-ACO01NR	¥2,000 (税込¥2,200)

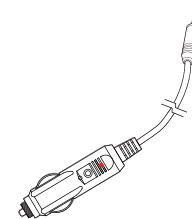

CN160NR / CN160DG用 カーチャージャー

コードNo.	価格
ES-CC001NR	¥2,000 (税込¥2,200)

eastsidemed株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-5
office 03-3815-0056 / fax 03-3818-4085
<https://www.eastsidemedinc.com>
hello@eastsidemedinc.com